


Windows10 更新アシスタントによる更新プログラムのインストール方法


ここでは、「伝の心」のシステム装置をインターネットに接続し、オンラインで更新プログラムをインストールする方法について説明します。

本作業は、「伝の心」を含めた全てのアプリケーションを終了した状態で行ってください。システム装置の電源を切らずに「伝の心」を終了させる方法は下記の通りです。

- ①「伝の心」のメインメニューを表示します。
- ②キーボード左側にある「Ctrl」キーを押してください。
- ③「Ctrl」キーを押したまま、「伝の心」トップ画面の右上 ボタンをマウスでクリックしてください。

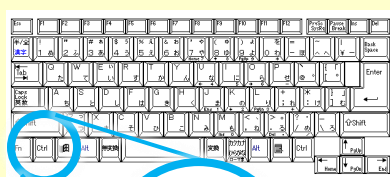


押し続ける


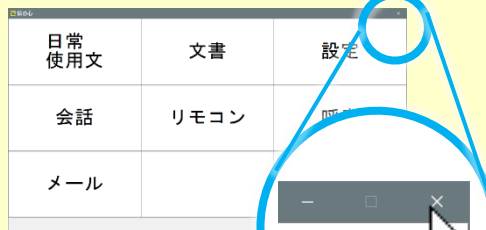


マウスでクリック

- ④「伝の心を停止します。よろしいですか？(パソコンの電源は切れません。)」のメッセージが表示されるので、「Ctrl」キーの押下を止め、「はい」を選択してください。
※伝の心のバージョンによって表示されるメッセージの内容が異なる場合があります。

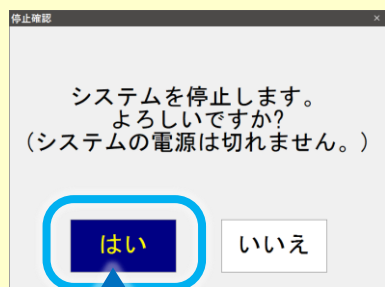

選択する

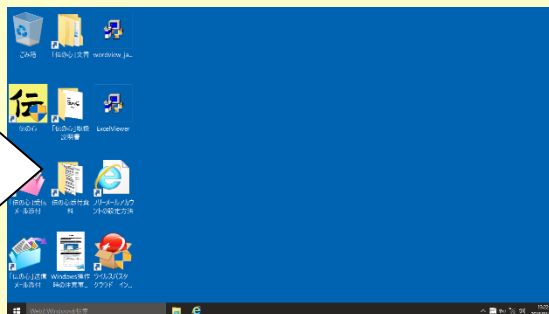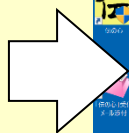


- ⑤「伝の心」が終了して、デスクトップ画面が表示されます。


(1) 下記リンクを参照して、Windows 10 更新アシスタントをダウンロードします。

Windows10 のダウンロード
[Windows 10Update Assistant](#)

(2) 表示された Windows 10 ダウンロード画面より「今すぐアップデート」ボタンをクリックします。

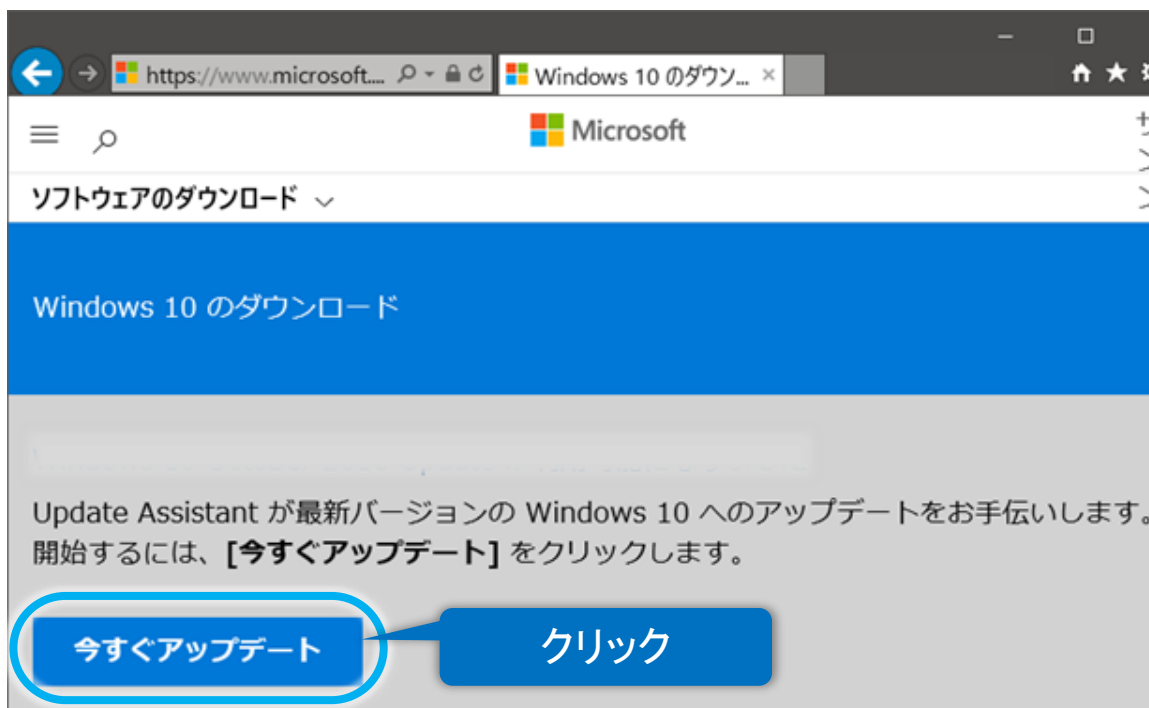

(3) 操作の選択画面が下記のように表示されるので、「保存」をクリックします。
※ご使用のブラウザやブラウザの設定の違いで、表示される画面や表記が異なる場合があります。

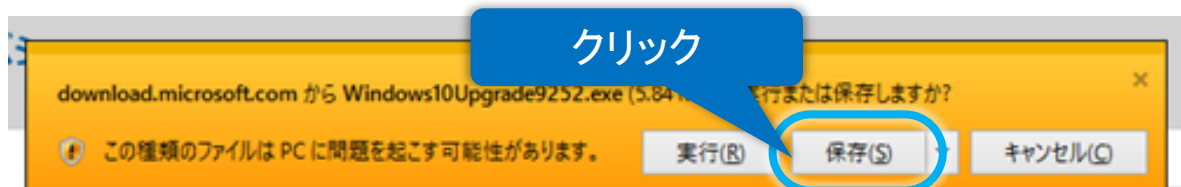


(4) ダウンロードが始まります。ダウンロードが終了すると、操作の選択画面が下記のように変更されますので、「フォルダーを開く」をクリックしてください。
※ご使用のブラウザやブラウザの設定の違いで、表示される画面や表記が異なる場合があります。



- (5) 更新プログラムが保存されたフォルダーが表示されるので、更新プログラムのファイル名をダブルクリックしてください。Windows 10 更新アシスタントが起動します。



- (6) 下記のような画面が表示されるので、「最新のバージョンは XXXX です。」という記載を確認します。この「XXXX」に記載されている OS のバージョンが適用したいバージョンであることを確認して「今すぐ更新」ボタンをクリックします。

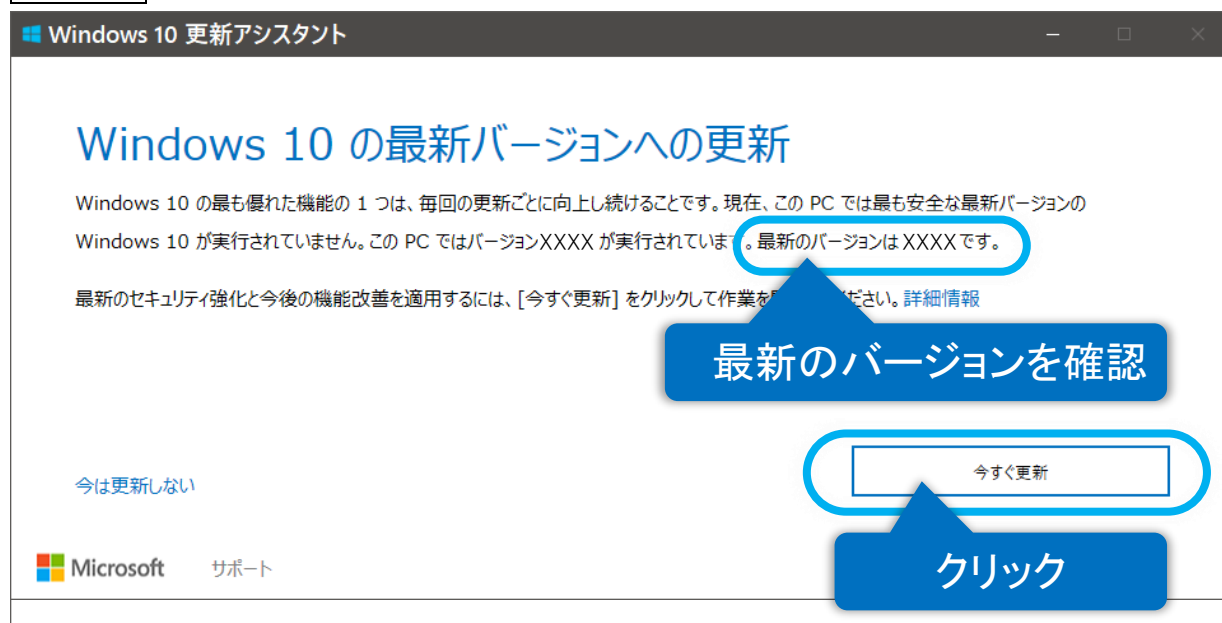


- (7) 互換性の確認後、「更新プログラムを準備しています」画面に変化します。Windows 10 更新プログラムのダウンロードとインストールが始まります。(更新には 2~3 時間掛かります。)






- (8) 「更新プログラムの準備ができました。」の表示がされたら、左下の「後で再起動する」をクリックして画面を閉じます。

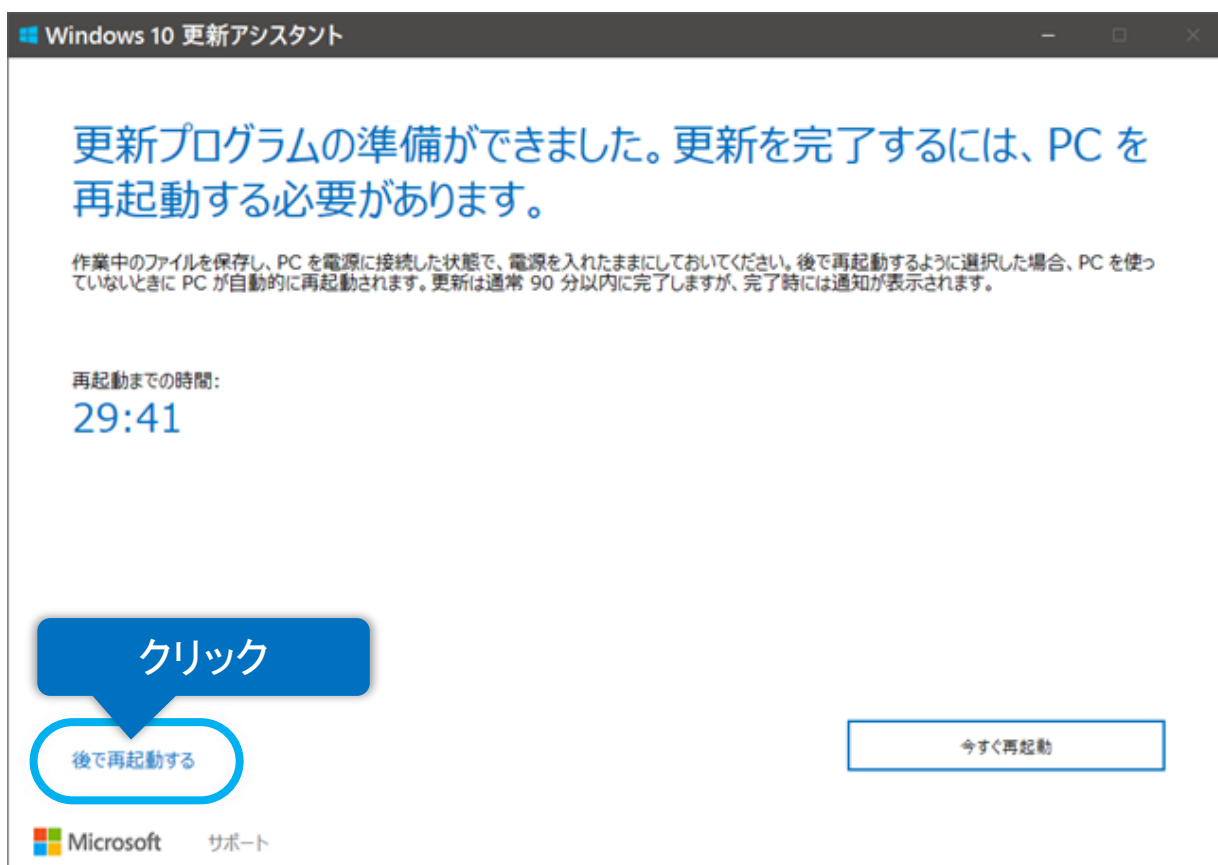


- (9) 開いているファイルや起動しているプログラムがないことを確認して、デスクトップ画面左下の[スタート]→[電源]→[再起動]を順にクリックすると、システム装置が再起動します。

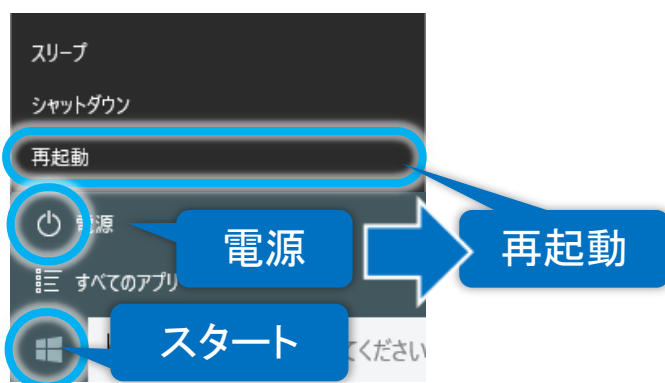

(10)再起動後、下記画面が表示される場合があります。


※下記画面が表示された場合は 9 ページの「プライバシーの設定について」を参照して設定を行ってください。

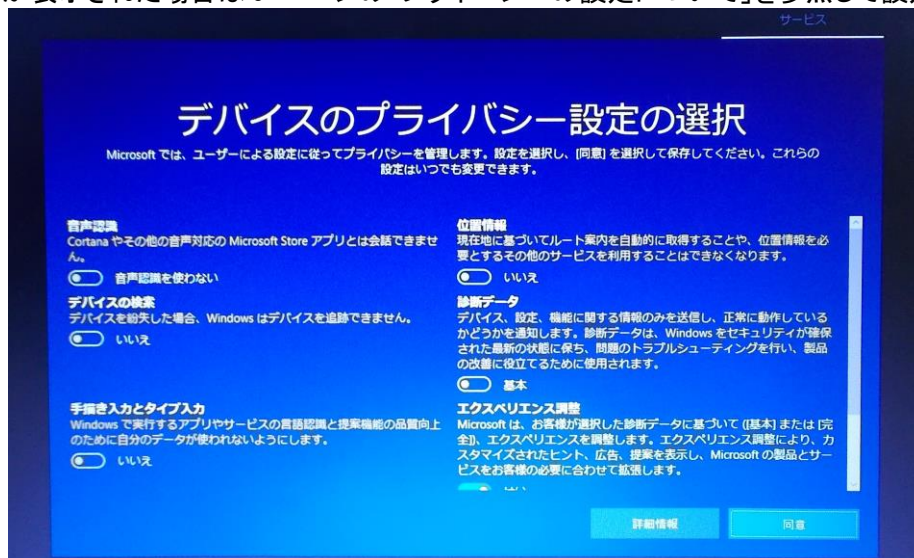


※下記画面が表示された場合は 10 ページの「デバイスの設定について」を参照して設定を行ってください。



※下記画面が表示された場合は 11 ページの「推奨ブラウザの設定について」を参照して設定を行ってください。

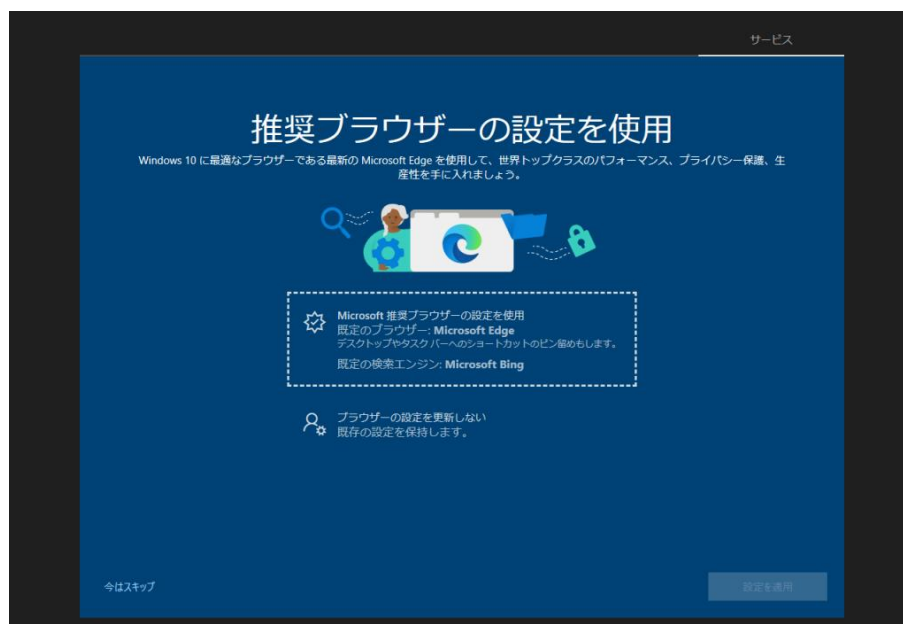


※下記画面が表示された場合は 12 ページの「サインインの設定について」を参照して設定を行ってください。

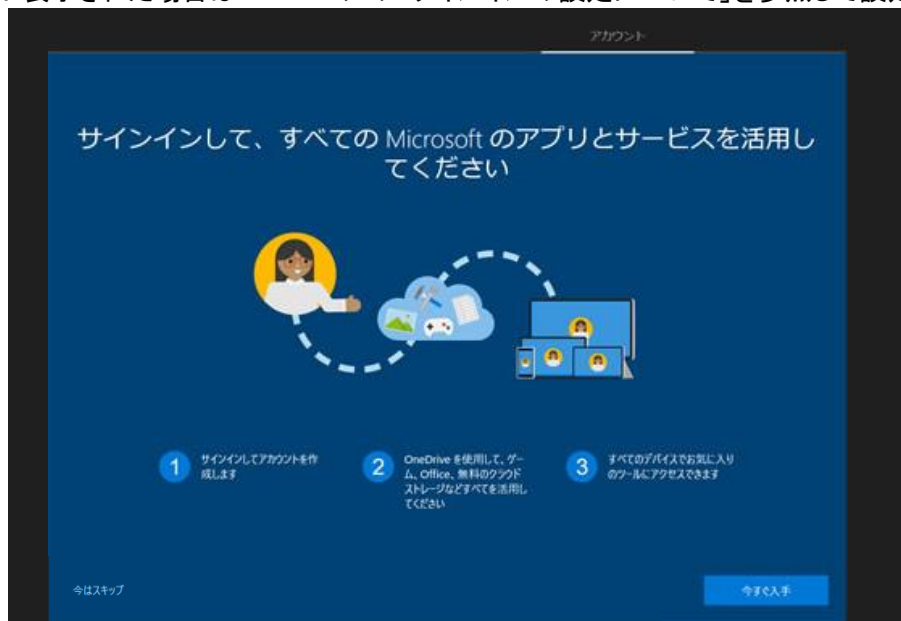

(11) また、デスクトップ画面表示後、下記のような表示される場合があります。

※13 ページの「バッテリー充電制御アップデートについて」を参照して設定を行ってください。

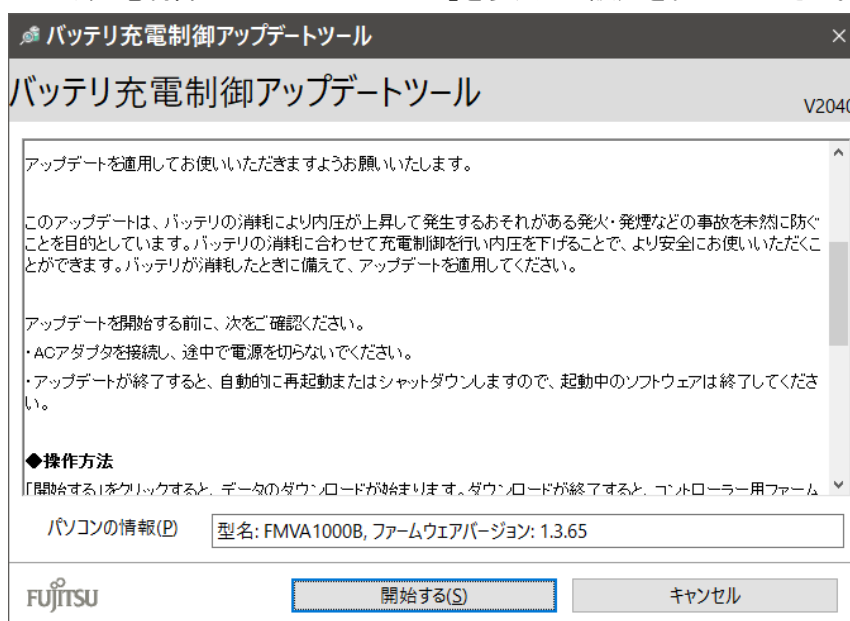


(12) 再起動後、下記リンクを参照して OS のバージョンを確認します。


※(6)項で確認したバージョンになっていることを確認します。

日立ケーイーシステムズ【伝の心】トラブルシューティングマニュアル:

[OS バージョンの確認手順](#)



(13) 最後に、Windows Update の設定を行います。

① デスクトップ画面の下タスクバーのexplorerアイコンをクリックします。

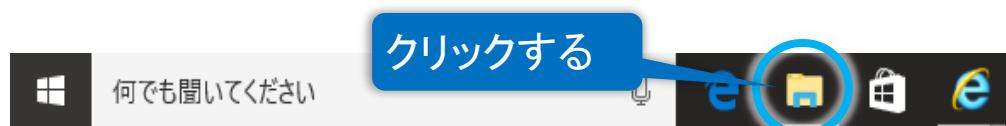


②表示された画面の左ペインの「PC」をクリックします。

③更に[ローカルディスク(C:)]→[DENTOOL]→[winupdate]の順にダブルクリックしていきます。

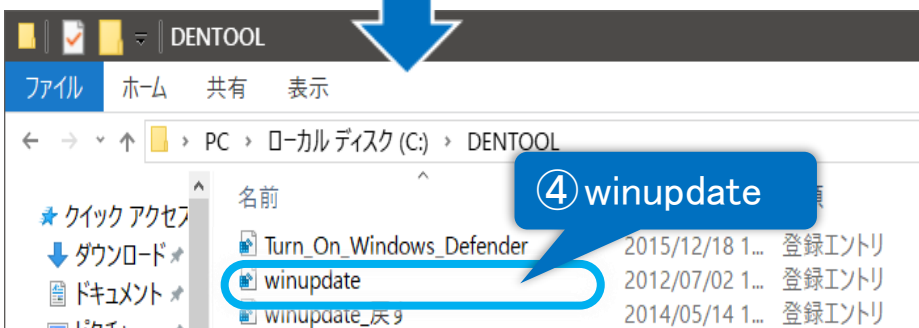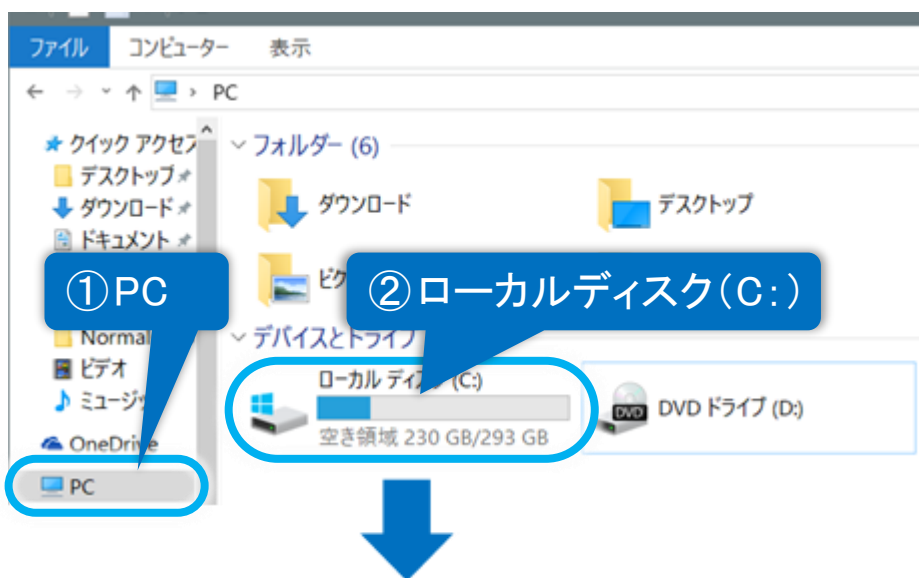


④[winupdate]をダブルクリックすると、下記確認画面が表示されるので、**はい**ボタンをクリックしてください。

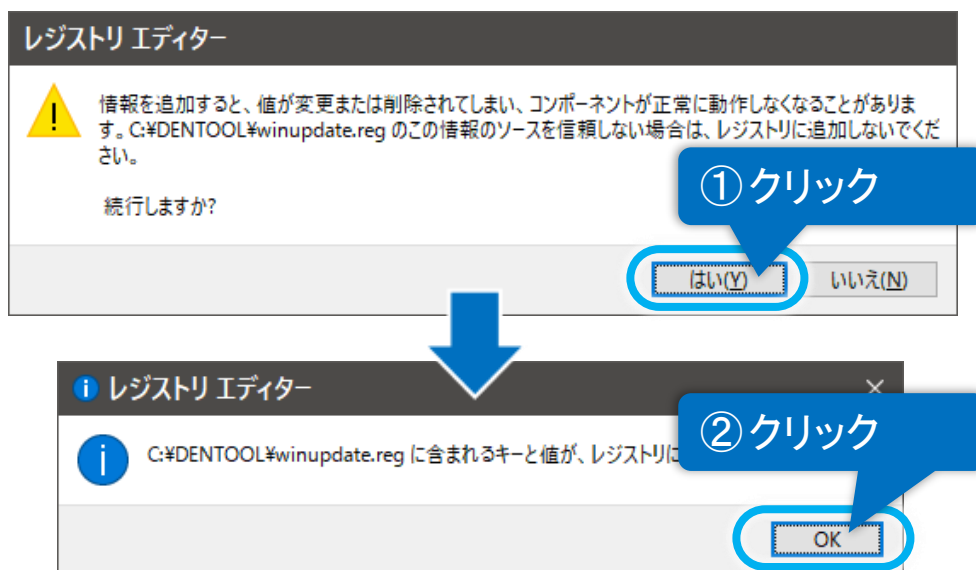

⑤「レジストリに正常に追加されました」のメッセージが表示されますので、**OK**ボタンをクリックしてください。

プライバシーの設定について


ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。

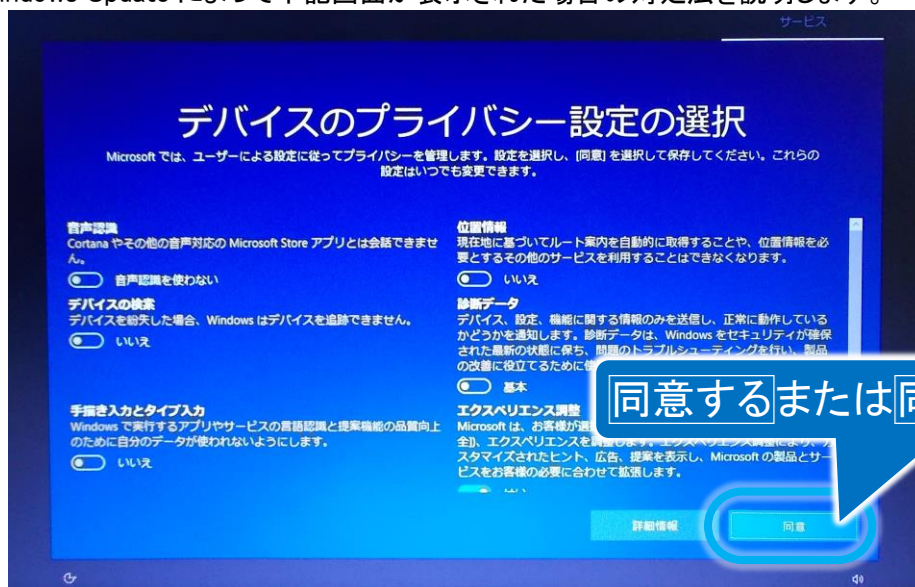


- (1) **同意する**または**同意**ボタンをクリックして、Windows Update を進めます。

デバイスの設定について

ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。

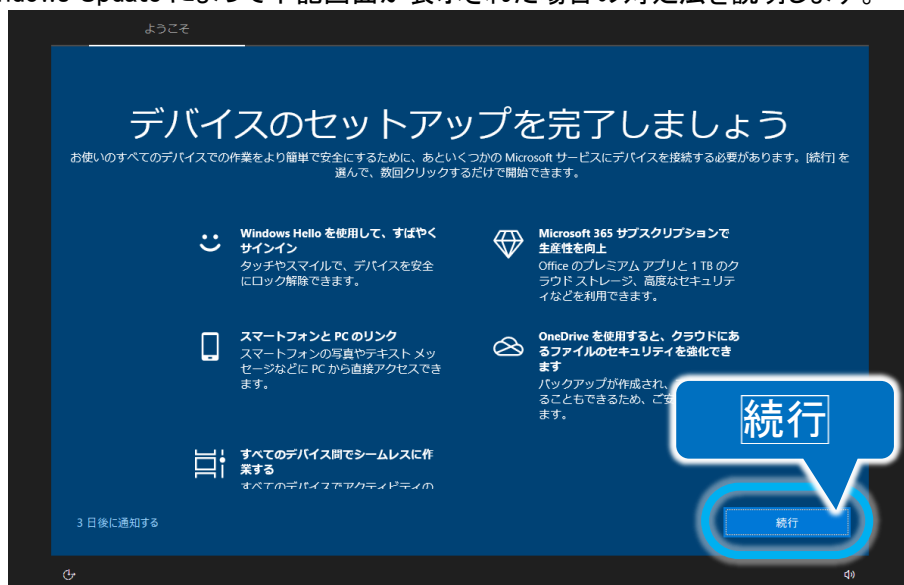


- (1) **続行** ボタンをクリックすると、下記画面に進みます。

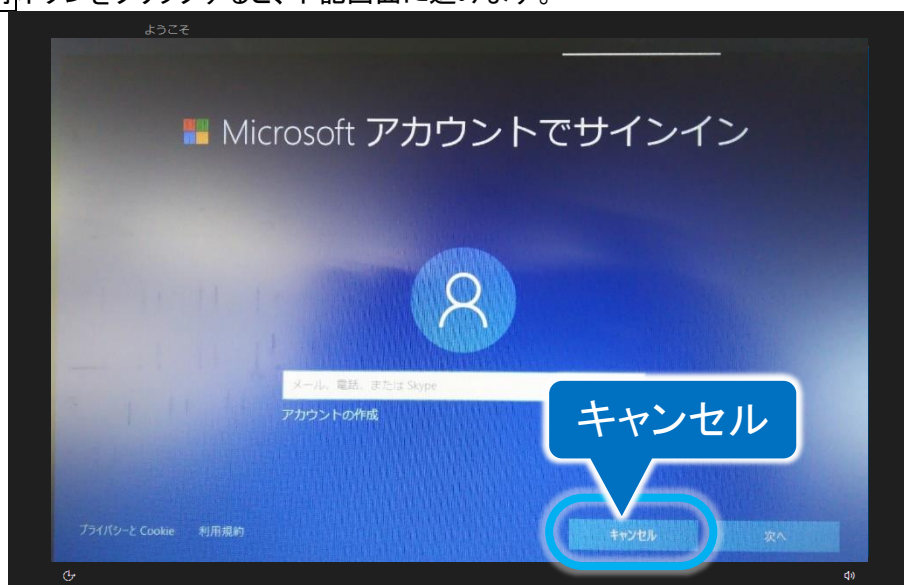

- (2) **キャンセル** ボタンをクリックして、Windows Update を進めます。

推奨ブラウザの設定について

ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。

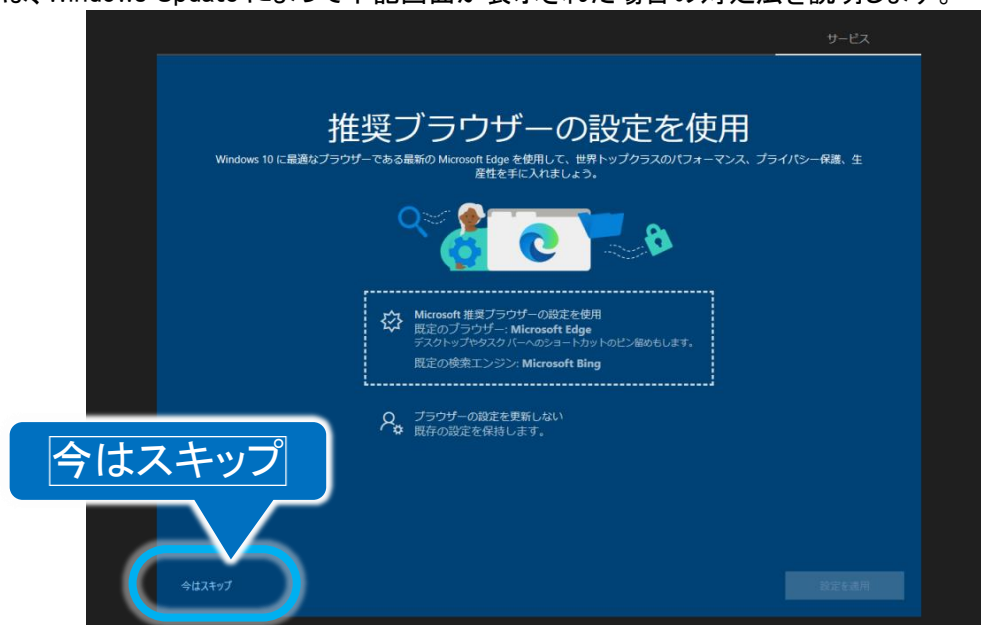

- (1) **今はスキップ**をクリックして、Windows Update を進めます。

サインインの設定について


ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。



- (1) **今スキップ** をクリックして、Windows Update を進めます。

バッテリー充電制御アップデートについて

ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。

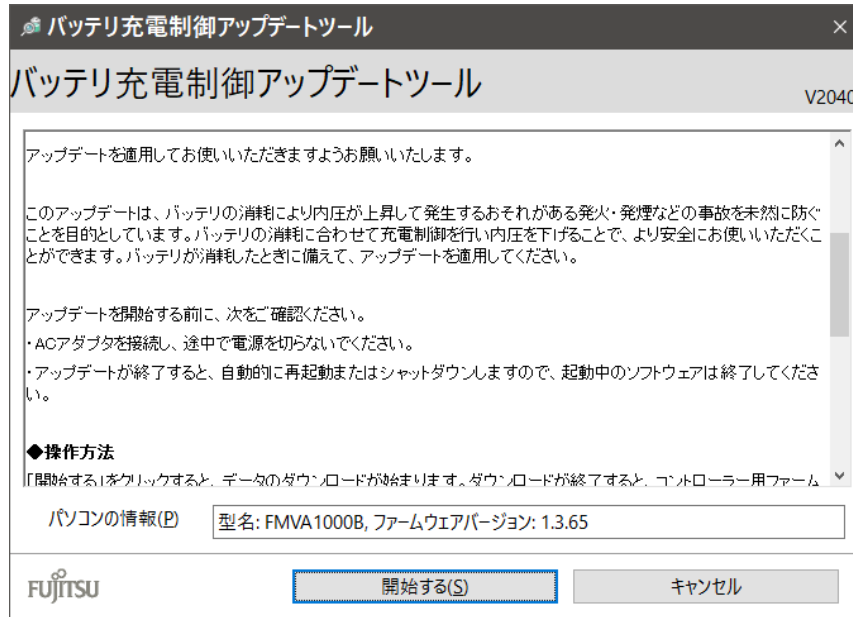

- (1) **開始する** ボタンをクリックすると、ソフトウェアのダウンロードが開始されます。詳細は下記ホームページをご参照ください。

バッテリー充電制御アップデートツール - FMV サポート 富士通パソコン
<https://azby.fmworld.net/support/info/batteryctrl/tool.html>

- (2) バッテリー充電制御アップデートは**キャンセル** ボタンのクリックで延期することも可能ですが、「伝の心」起動時に毎回表示されるようになりますので、この機会にアップデートを行うことをお勧めします。

※ Microsoft セキュリティ情報について

Windows における脆弱性については Microsoft セキュリティ情報を参照ください。

Microsoft セキュリティ情報

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/security-updates/>