

Windows Update による更新プログラムのインストール方法


ここでは、「伝の心」のシステム装置をインターネットに接続し、オンラインで更新プログラムをインストールする方法について説明します。

本作業は、「伝の心」を含めた全てのアプリケーションを終了した状態で行ってください。システム装置の電源を切らずに「伝の心」を終了させる方法は下記の通りです。

- ①「伝の心」のメインメニューを表示します。
- ②キーボード左側にある「Ctrl」キーを押してください。
- ③「Ctrl」キーを押したまま、「伝の心」トップ画面の右上 ボタンをマウスでクリックしてください。




押し続ける


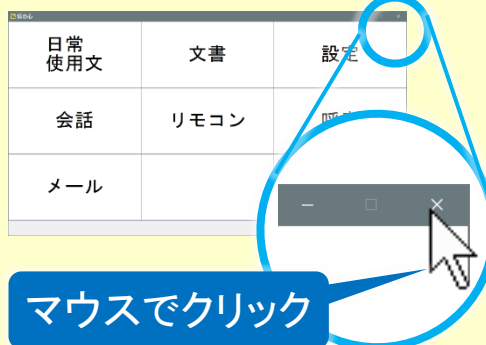


マウスでクリック

- ④「システムを停止します。よろしいですか？(システムの電源は切れません。)」のメッセージが表示されるので、「Ctrl」キーの押下を止め、「はい」を選択してください。
※伝の心のバージョンによって表示されるメッセージの内容が異なる場合があります。

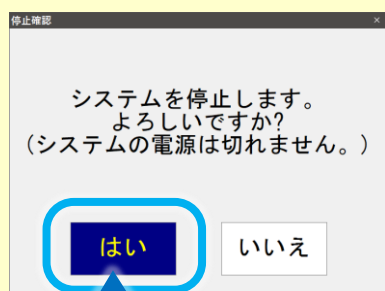


選択する

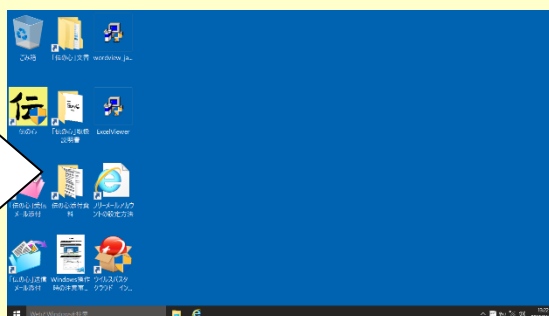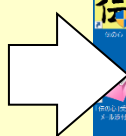

- ⑤「伝の心」が終了して、デスクトップ画面が表示されます。

(1) Windows のスタートメニューから「設定」→「システム」を順次マウスでクリックしていきます。

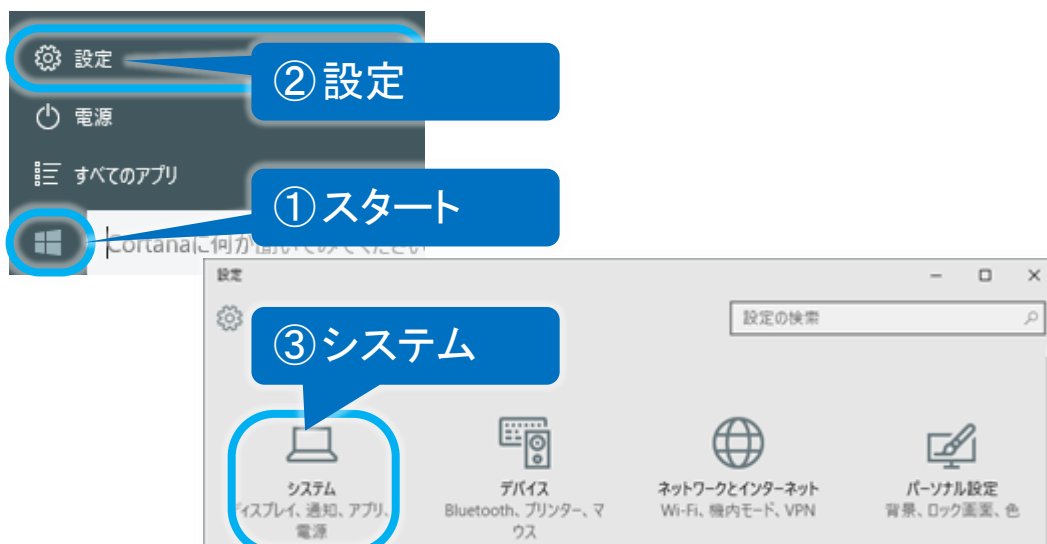

(2) 左メニューの「バージョン情報」をクリックし、バージョンを確認します。

※「バージョン情報」が「詳細情報」の場合もあります。

バージョンが、適用したい Update のバージョンであれば、既に適用されていますので、再適用の必要はありません。(※ここで終了です。)




適用可能なバージョンであれば、(3)に進みます。


(3) 左上「←」ボタンをマウスでクリックして「設定」画面に戻り、「更新とセキュリティ」をクリックします。



(4) 更新とセキュリティ画面が表示されるので、左メニューの「Windows Update」をクリックし、更新プログラムのチェックボタンをクリックします。

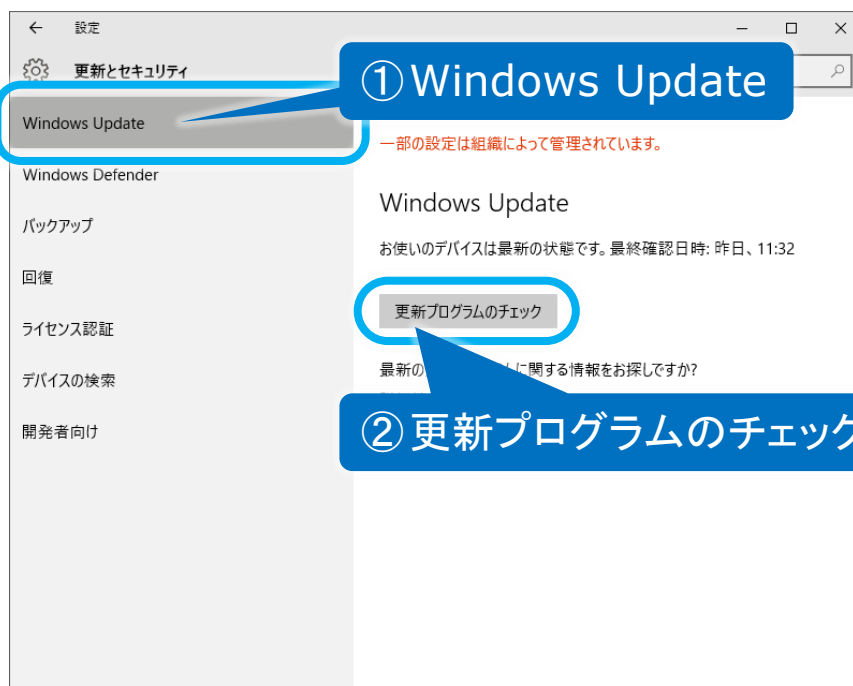

(5) 利用可能な更新プログラムが検索され、ダウンロードとインストールが、実行されます。

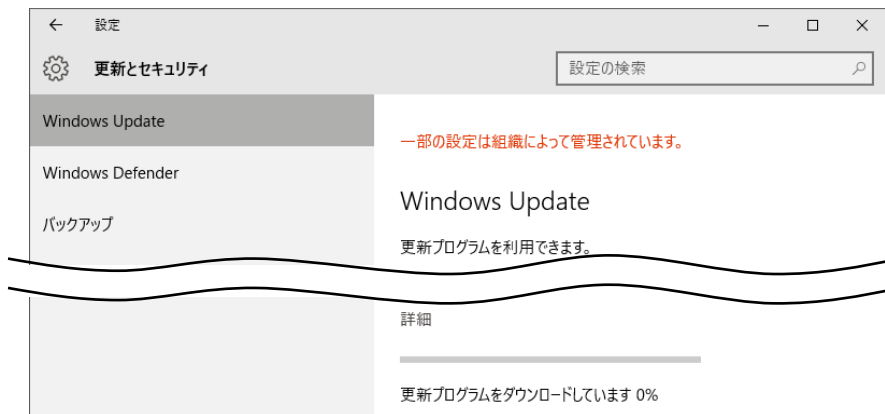

初めて Windows Update を行う場合は、ダウンロードおよびインストールする修正プログラムが多くなるため、ダウンロードに時間が掛かることがあります。
また、Windows Update サーバーが混雑している時などは、Windows Update に失敗したり、ダウンロードの途中でシステム装置がフリーズしたりすることがあります。
このような場合は、時間をおいて再度 Windows Update を行ってください。
(※既にインストール済みのものや、インストール不要と判断されたプログラムは表示されません。また、この時インストールしなかったプログラムは、次回の Windows Update 時にインストールすることが可能です。)


(6) 適用に再起動が必要な場合は、**今すぐ再起動する**ボタンが表示されます。**今すぐ再起動する**ボタンをクリックしてください。




(※**今すぐ再起動する**ボタンが表示されない場合もあります。この場合、更新とセキュリティ画面を1度閉じて、再起動は行わず、(4)を行ってください。)

(7) 再起動後、下記画面が表示される場合があります。


※下記画面が表示された場合は 7 ページの「プライバシーの設定について」を参照して設定を行ってください。

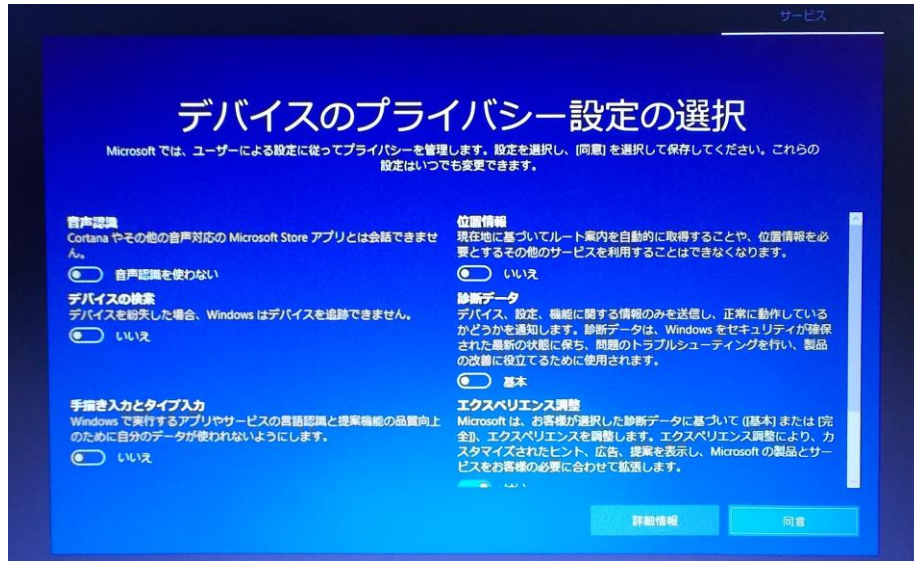


※下記画面が表示された場合は 8 ページの「デバイスの設定について」を参照して設定を行ってください。

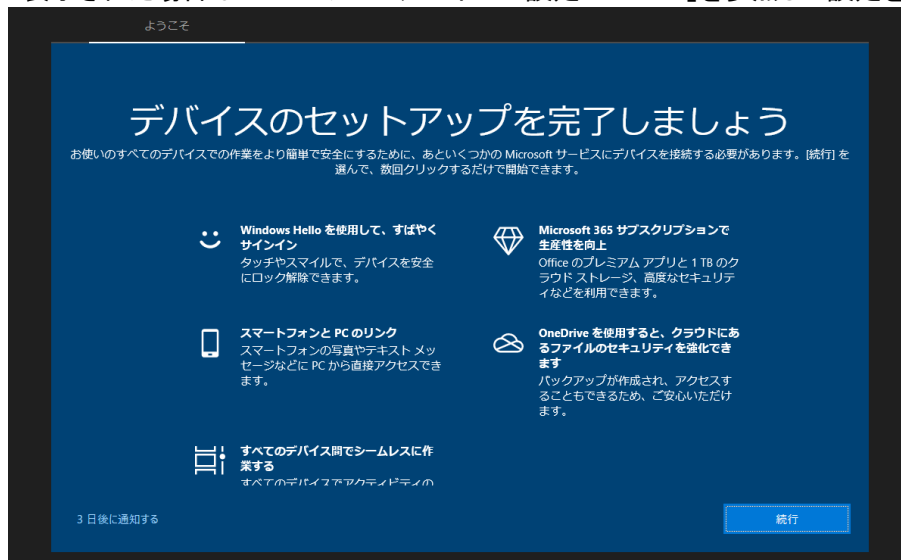


※下記画面が表示された場合は 9 ページの「推奨ブラウザの設定について」を参照して設定を行ってください。

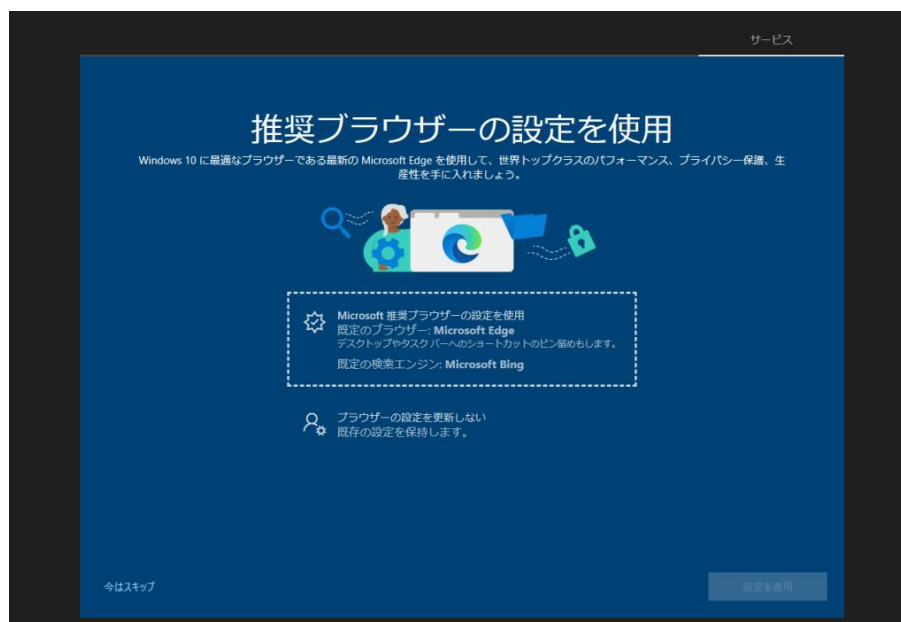


※下記画面が表示された場合は 10 ページの「サインインの設定について」を参照して設定を行ってください。

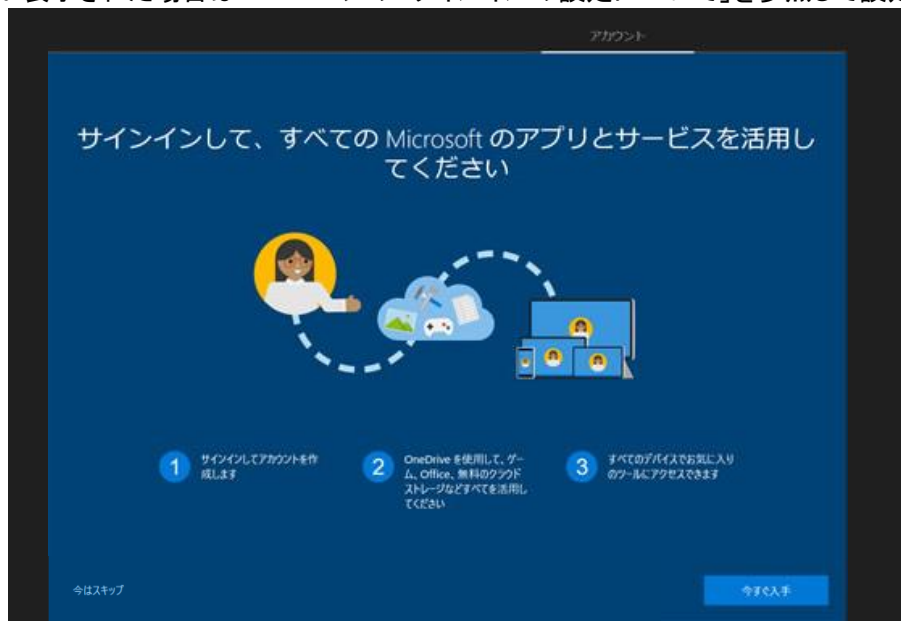

- (8) また、デスクトップ画面表示後、下記のような表示される場合があります。
※11 ページの「バッテリー充電制御アップデートについて」を参照して設定を行ってください。

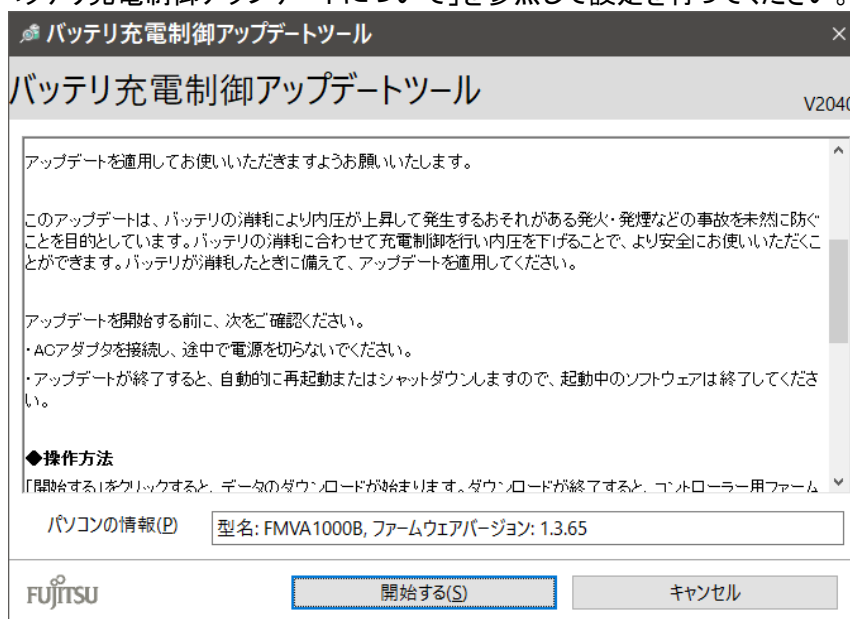


- (9) 再起動後、(4)を再度行い、「最新の状態です。最終チェック日時: 今日、・・・」と表示されれば終了です。

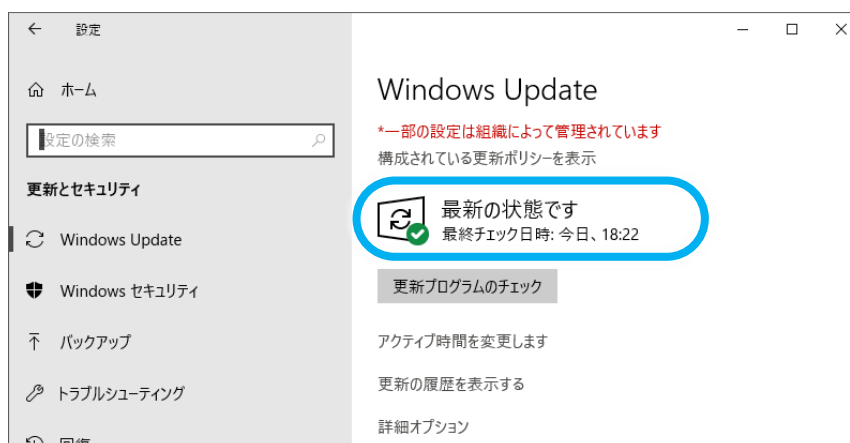

プライバシーの設定について


ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。

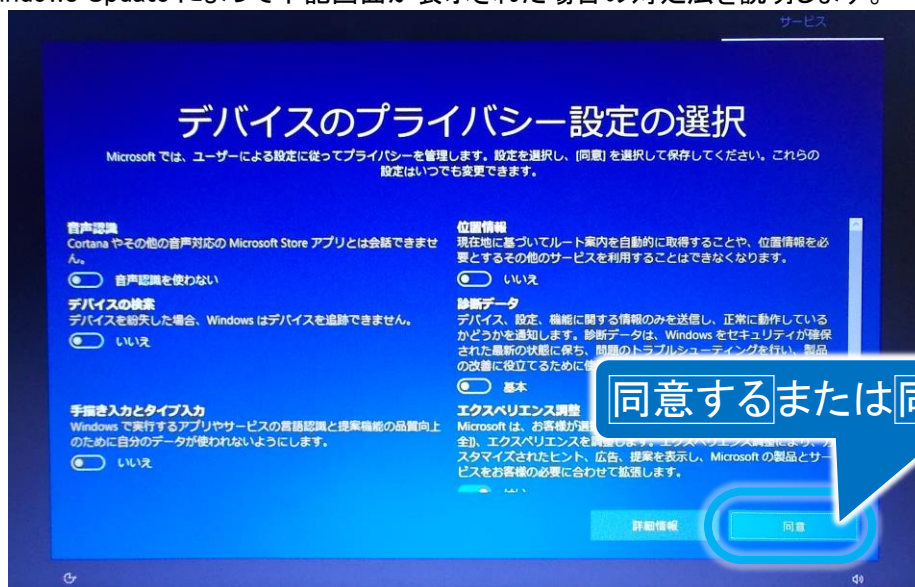


- (1) **同意する**または**同意**ボタンをクリックして、Windows Update を進めます。

デバイスの設定について

ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。

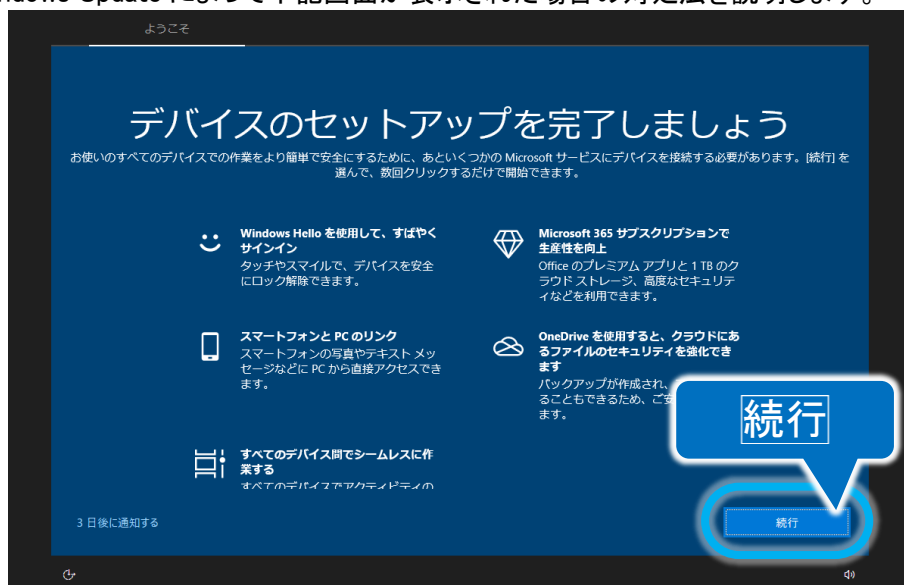


(1) **続ける** ボタンをクリックすると、下記画面に進みます。

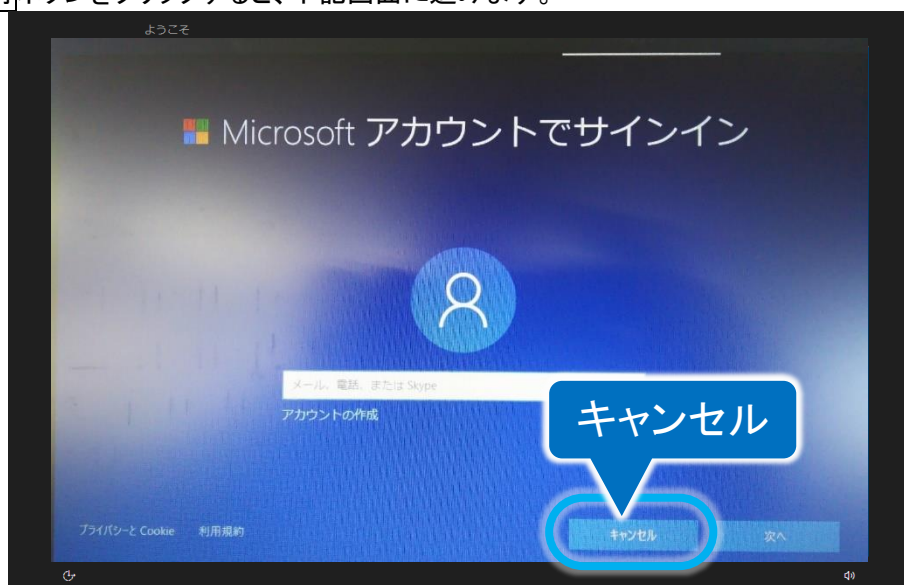

(2) **キャンセル** ボタンをクリックして、Windows Update を進めます。

推奨ブラウザの設定について

ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。

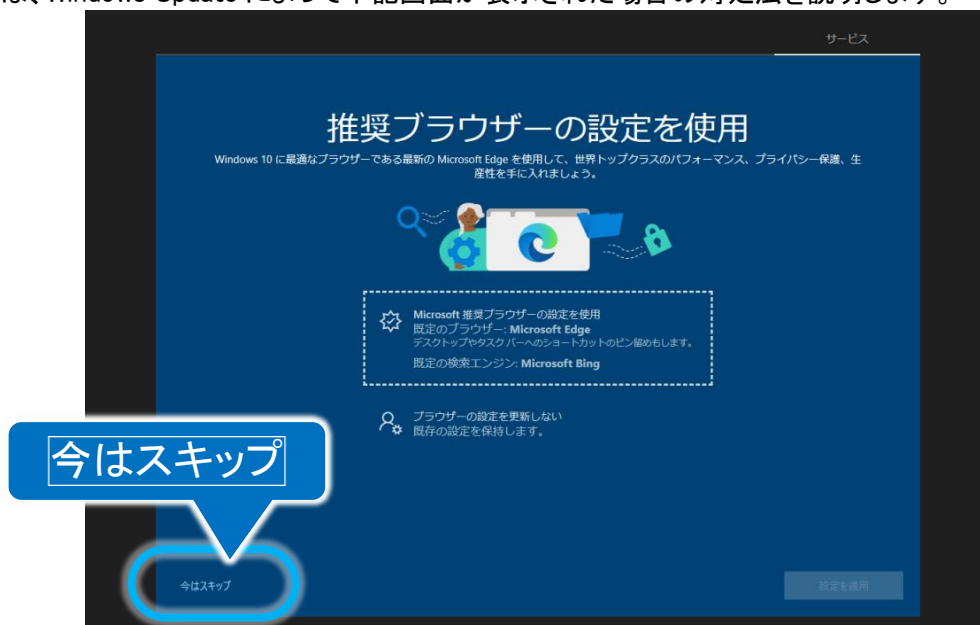

- (1) **今はスキップ**をクリックして、Windows Update を進めます。

サインインの設定について


ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。



- (1) **今スキップ** をクリックして、Windows Update を進めます。

バッテリー充電制御アップデートについて

ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。

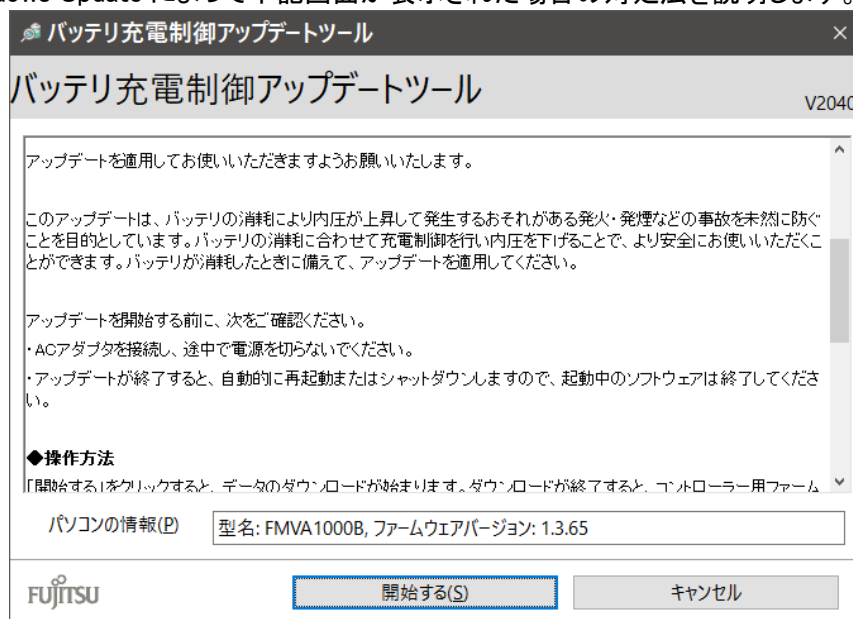

- (1) **開始する** ボタンをクリックすると、ソフトウェアのダウンロードが開始されます。
詳細は下記ホームページをご参照ください。

バッテリー充電制御アップデートツール - FMV サポート 富士通パソコン
<https://azby.fmworld.net/support/info/batteryctrl/tool.html>

- (2) バッテリー充電制御アップデートは**キャンセル** ボタンのクリックで延期することも可能ですが、「伝の心」起動時に毎回表示されるようになりますので、この機会にアップデートを行うことをお勧めします。

※ Microsoft セキュリティ情報について

Windows における脆弱性については Microsoft セキュリティ情報を参照ください。

Microsoft セキュリティ情報

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/security-updates/>