

Windows Update による更新プログラムのインストール方法

ここでは、「伝の心」のシステム装置をインターネットに接続し、オンラインで更新プログラムをインストールする方法について説明します。

本作業は、「伝の心」を含めた全てのアプリケーションを終了した状態で行ってください。システム装置の電源を切らずに「伝の心」を終了させる方法は下記の通りです。

- ①「伝の心」のメインメニューを表示します。
- ②キーボード左側にある「Ctrl」キーを押してください。
- ③「Ctrl」キーを押したまま、「伝の心」トップ画面の右上「X」ボタンをマウスでクリックしてください。




押し続ける




マウスでクリック

- ④「システムを停止します。よろしいですか？(システムの電源は切れません。)」のメッセージが表示されるので、「Ctrl」キーの押下を止め、「はい」を選択してください。
※伝の心のバージョンによって表示されるメッセージの内容が異なる場合があります。

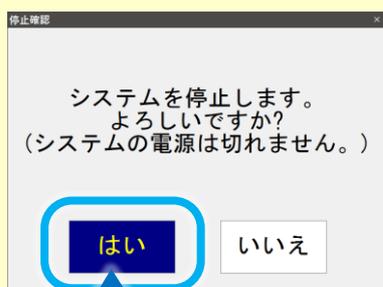

選択する

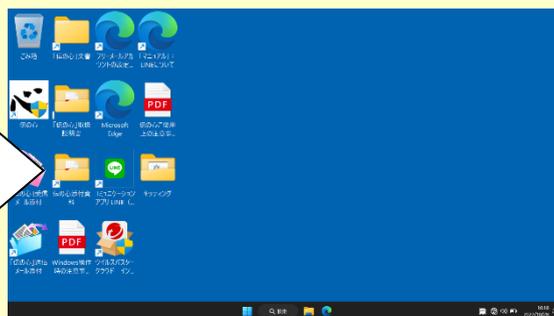


- ⑤「伝の心」が終了して、デスクトップ画面が表示されます。

(1) Windows のスタートメニューから「設定」→「システム」を順次マウスでクリックしていきます。




(2) 右メニューの「バージョン情報」をクリックし、バージョンを確認します。
バージョンが、適用したい Update のバージョンであれば、既に適用されていますので、再適用の必要はありません。(※ここで終了です)。

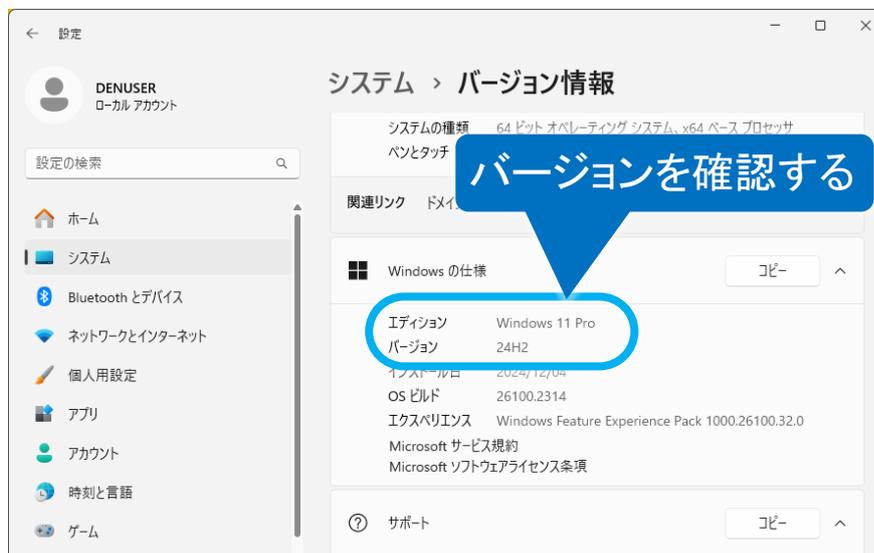

適用可能なバージョンであれば、(3)に進みます。

- (3) 左メニューの「Windows Update」をマウスでクリックして右側に「Windows Update」画面を表示させ、**更新プログラムのチェック**ボタンをクリックします。

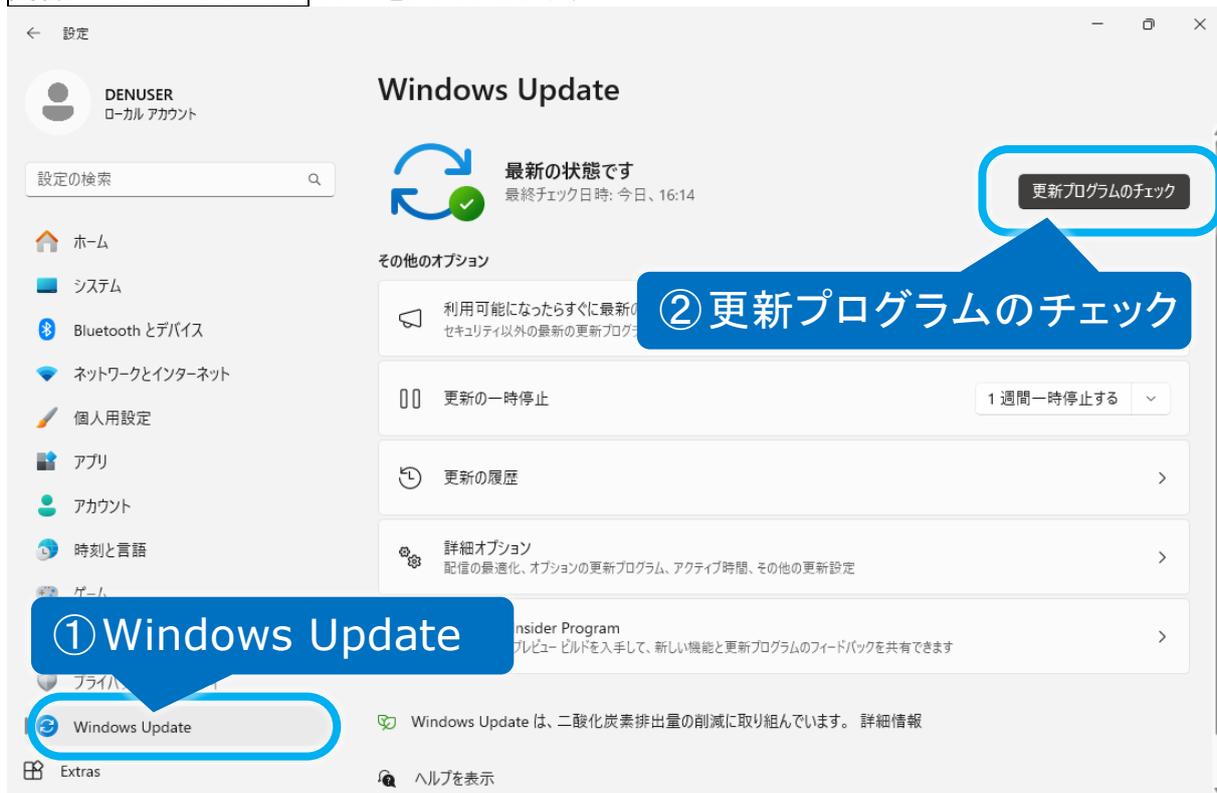

- (4) 利用可能な更新プログラムが検索され、ダウンロードとインストールが、実行されます。



初めて Windows Update を行う場合は、ダウンロードおよびインストールする修正プログラムが多くなるため、ダウンロードに時間が掛かることがあります。
また、Windows Update サーバーが混雑している時などは、Windows Update に失敗したり、ダウンロードの途中でシステム装置がフリーズしたりすることがあります。
このような場合は、時間をおいて再度 Windows Update を行ってください。
(※既にインストール済みのものや、インストール不要と判断されたプログラムは表示されません。また、この時インストールしなかったプログラムは、次回の Windows Update 時にインストールすることが可能です。)

- (5) 適用に再起動が必要な場合は、**今すぐ再起動する**ボタンが表示されます。**今すぐ再起動する**ボタンをクリックしてください。



(※「今すぐ再起動する」ボタンが表示されない場合もあります。この場合、更新とセキュリティ画面を1度閉じて、再起動は行わず、(3)を行ってください。)

(6) 再起動後、(3)を再度行い、「最新の状態です。最終チェック日時: 今日、・・・」と表示されれば終了です。



※ Microsoft セキュリティ情報について

Windows における脆弱性については Microsoft セキュリティ情報を参照ください。

Microsoft セキュリティ情報

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/security-updates/>