


Windows11 インストールアシスタントによる更新プログラムのインストール方法


ここでは、「伝の心」のシステム装置をインターネットに接続し、オンラインで更新プログラムをインストールする方法について説明します。

本作業は、「伝の心」を含めた全てのアプリケーションを終了した状態で行ってください。システム装置の電源を切らずに「伝の心」を終了させる方法は下記の通りです。

- (1)「伝の心」のメインメニューを表示します。
- (2)キーボード左側にある「Ctrl」キーを押してください。
- (3)「Ctrl」キーを押したまま、「伝の心」トップ画面の右上「X」ボタンをマウスでクリックしてください。

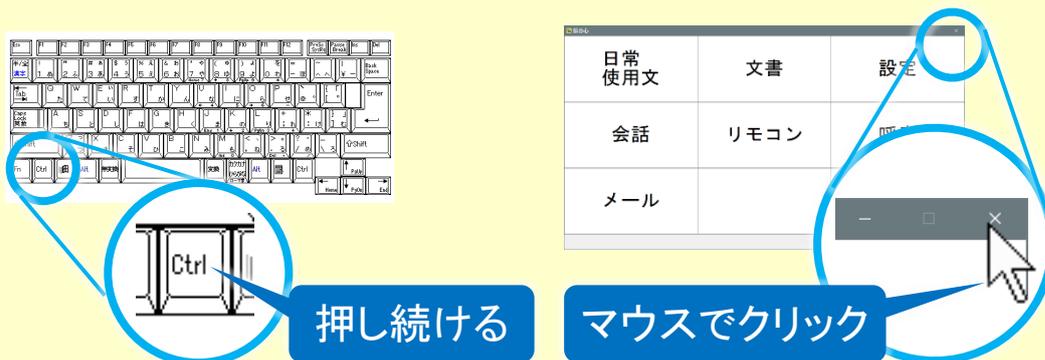

- (4)「システムを停止します。よろしいですか？(システムの電源は切れません。)」のメッセージが表示されるので、「Ctrl」キーの押下を止め、「はい」を選択してください。
※伝の心のバージョンによって表示されるメッセージの内容が異なる場合があります。

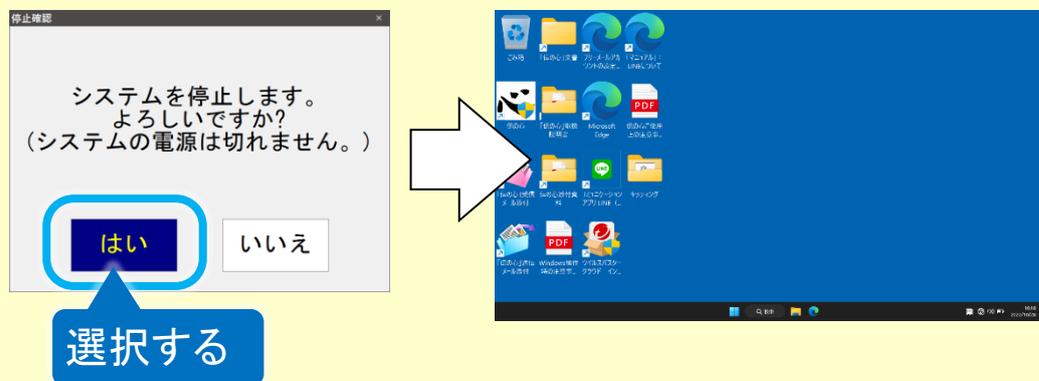


- (5)「伝の心」が終了して、デスクトップ画面が表示されます。

1. 下記リンクを参照して、Windows 11 インストールアシスタントをダウンロードします。

Windows11 のダウンロード

[Windows 11 インストールアシスタント](https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11)


2. 表示された Windows 11 ダウンロード画面にて、インストールするバージョンを確認して、**今すぐダウンロード** ボタンをクリックします。

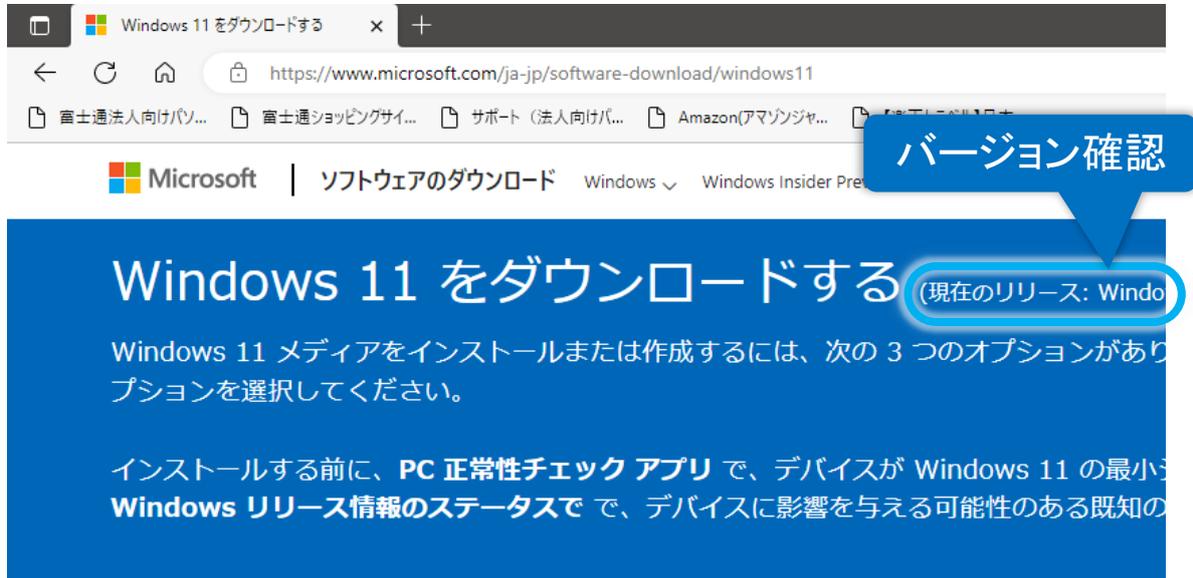


Windows 11 インストール アシスタント

これは、現在ご利用のデバイスに Windows 11 をインストールする最適なオプションです。開始するには、[今すぐダウンロード] をクリックしてください。


⊕ 作業を開始する準備

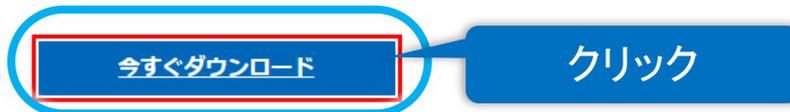


3. ダウンロードが始まり、ダウンロード画面が下記のように画面右上に表示されるので、ダウンロードが終了したら「フォルダーに表示」アイコンをクリックします。
※ご使用のブラウザやブラウザの設定の違いで、表示される画面や表記が異なる場合があります。

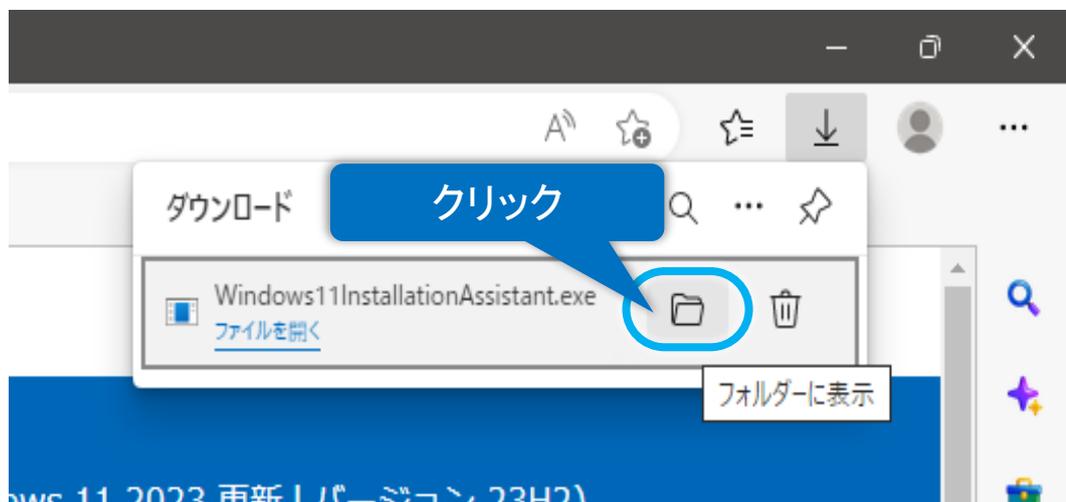


4. プログラムが保存されたフォルダーが表示されるので、プログラムのファイル名「Windows11InstallationAssistant」をダブルクリックしてください。Windows 11 インストールアシスタントが起動します。

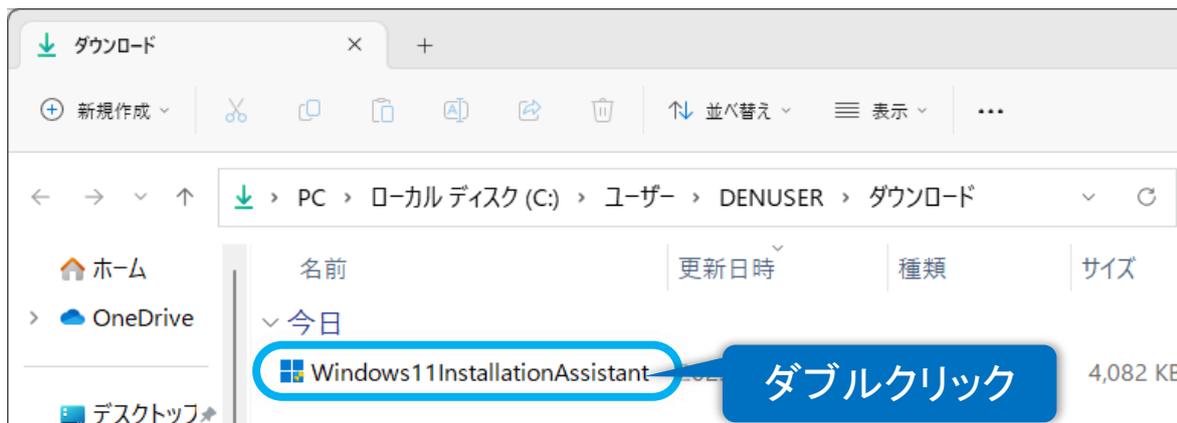


5. 下記のような画面が表示された場合は、[PC 正常性チェック アプリを入手する]をクリックして、まず「PC 正常性チェック アプリ」をダウンロードします。
「Windows11InstallationAssistant」をダブルクリックして、6. 項の画面が表示された場合は、6. 項に進みます。

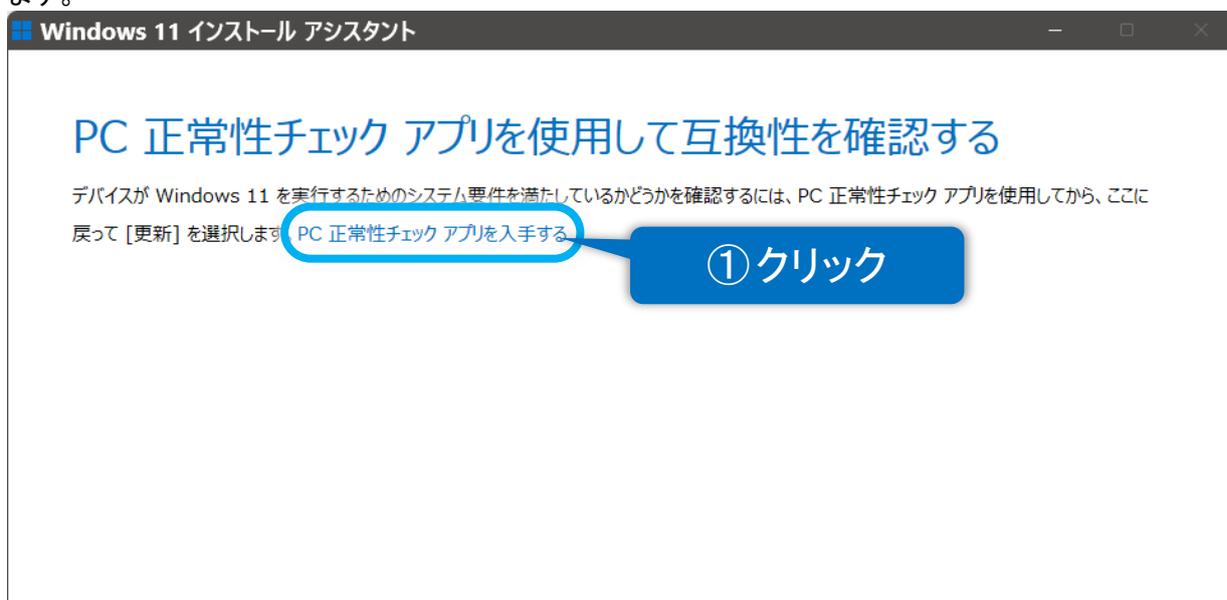


- (1) インストールアシスタントをダウンロードした時と同様にダウンロードされるので、アプリが保存されたフォルダーにてプログラムのファイル名「WindowsPCHealthCheckSetup」をダブルクリックしてください。

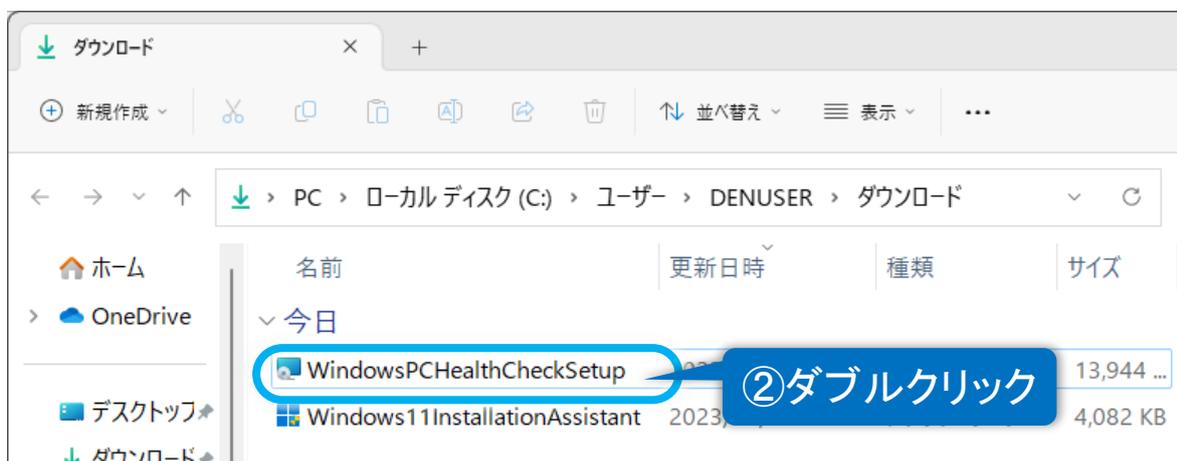

(2) 下記のような画面が表示されるので、「使用許諾書に同意します」にチェックを入れてインストールボタンをクリックすると、アプリのインストールが始まります。

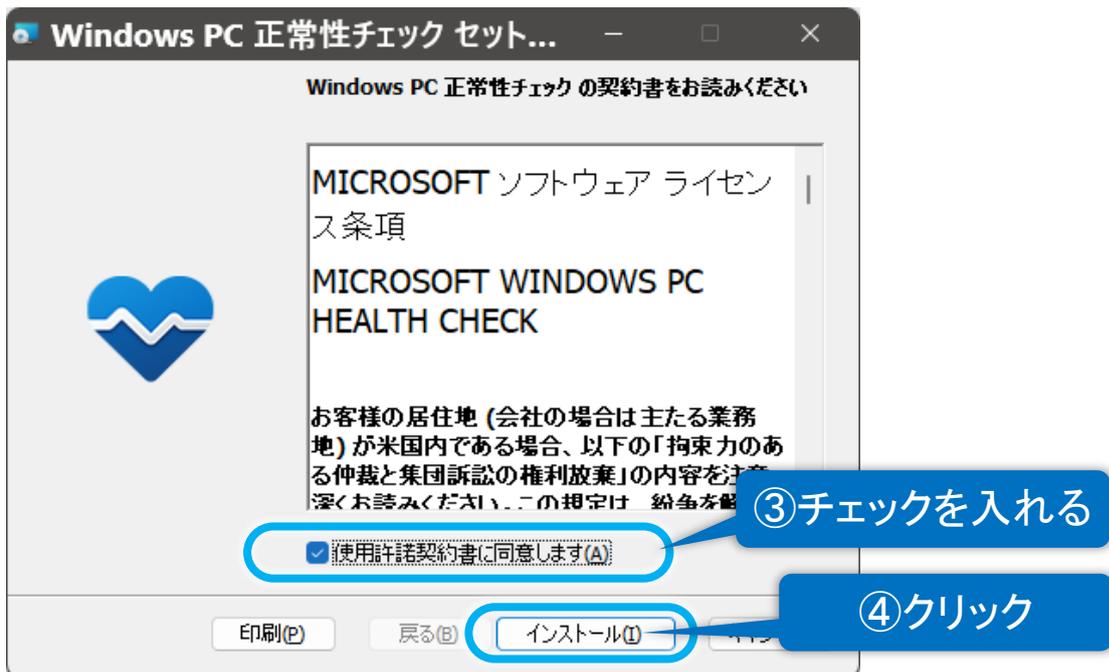


(3) インストールが終了し、完了ボタンをクリックすると、「PC 正常性チェック アプリ」が起動します。

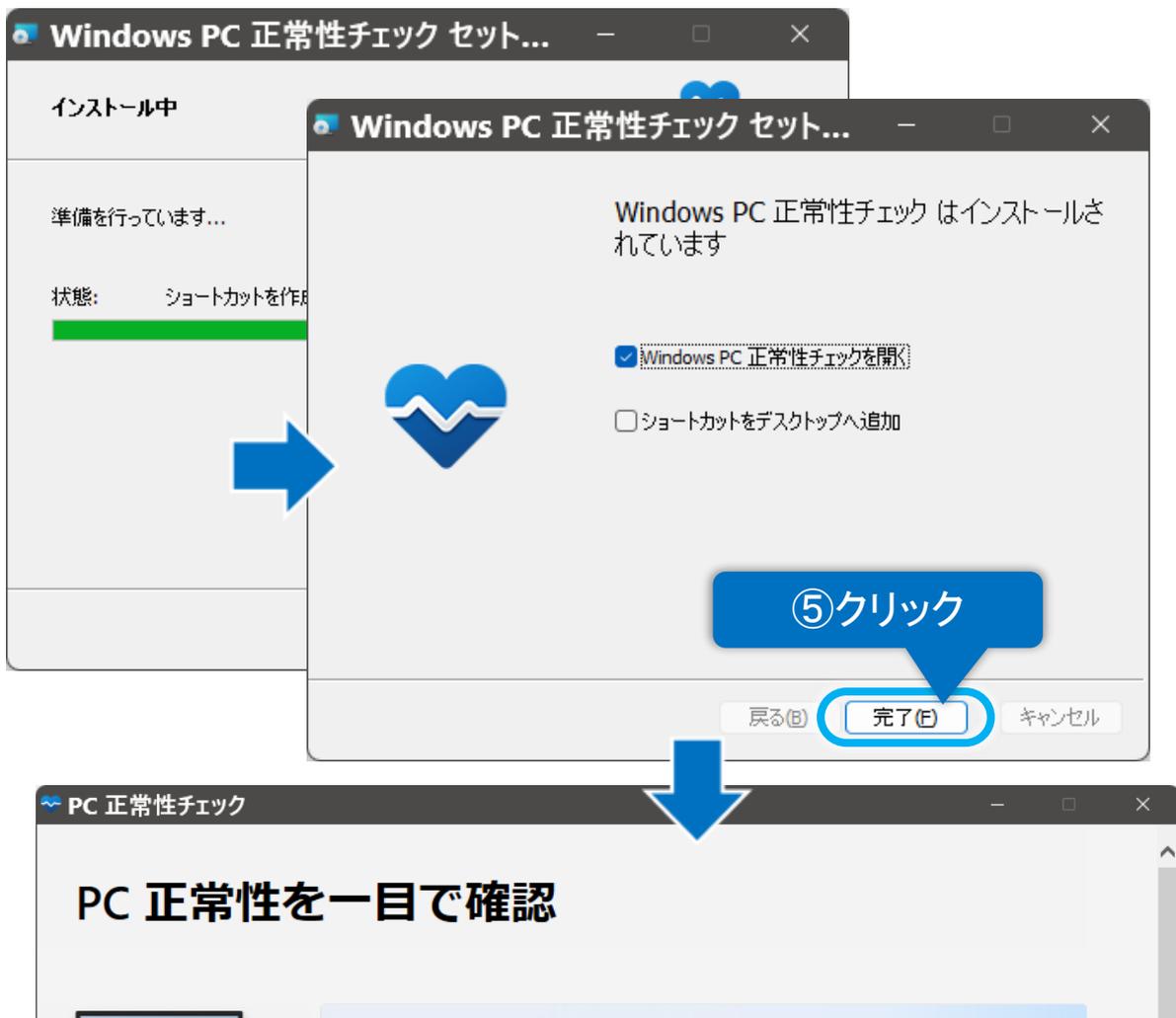


- (4) **今すぐチェック** ボタンをクリックして「この PC は Windows 11 の要件を満たしています」の表示を確認します。




- (5) その後「PC 正常性チェック アプリ」を閉じて、Windows 11 インストールアシスタントの画面に戻り**最新の情報に更新** ボタンをクリックします。

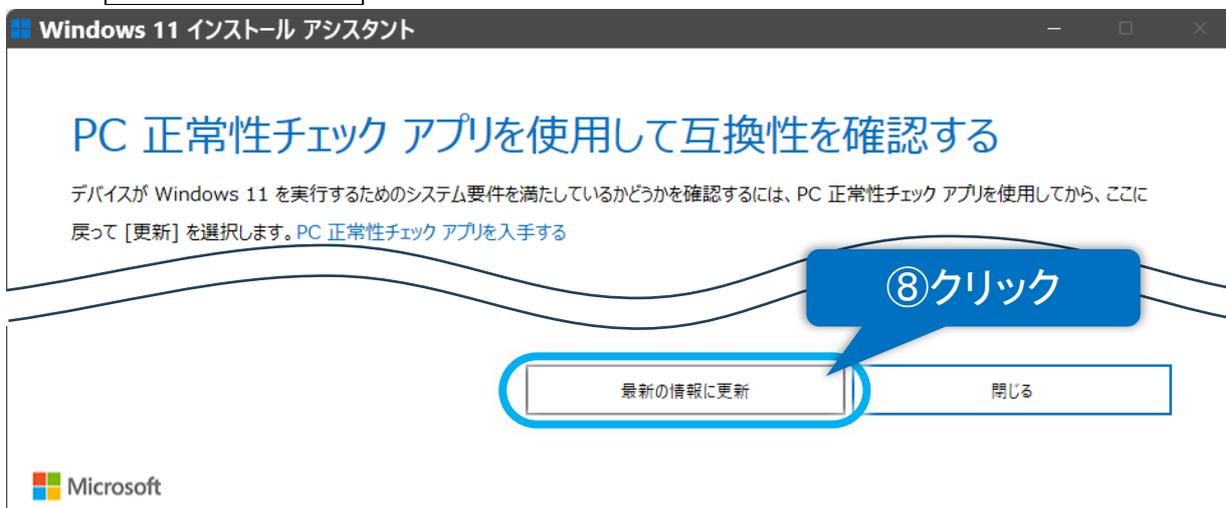


6. 下記のような画面が表示されるので、ライセンス条項を一読し、**同意してインストール** ボタンをクリックします。

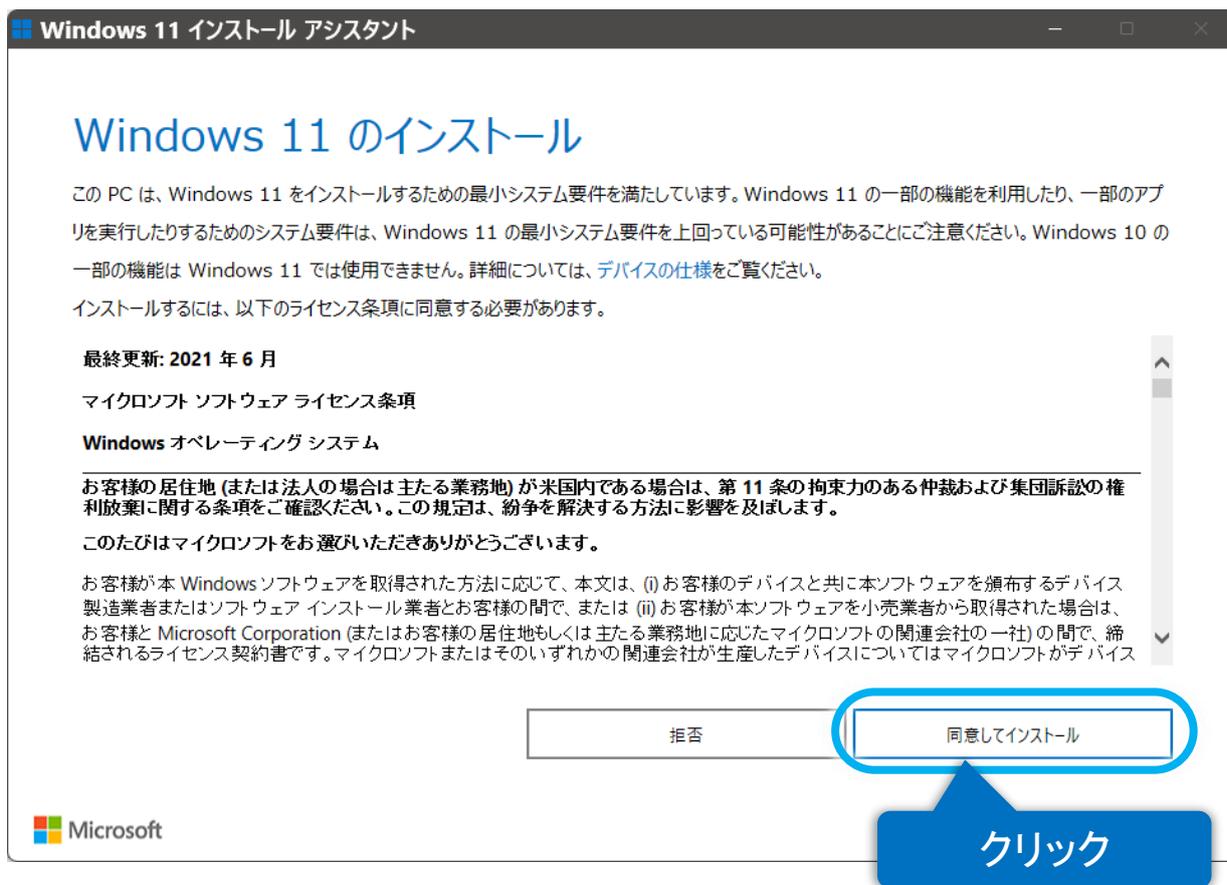


7. Windows11 更新プログラムのダウンロードとインストールが始まります。
(更新には 2~3 時間掛かる場合があります。)

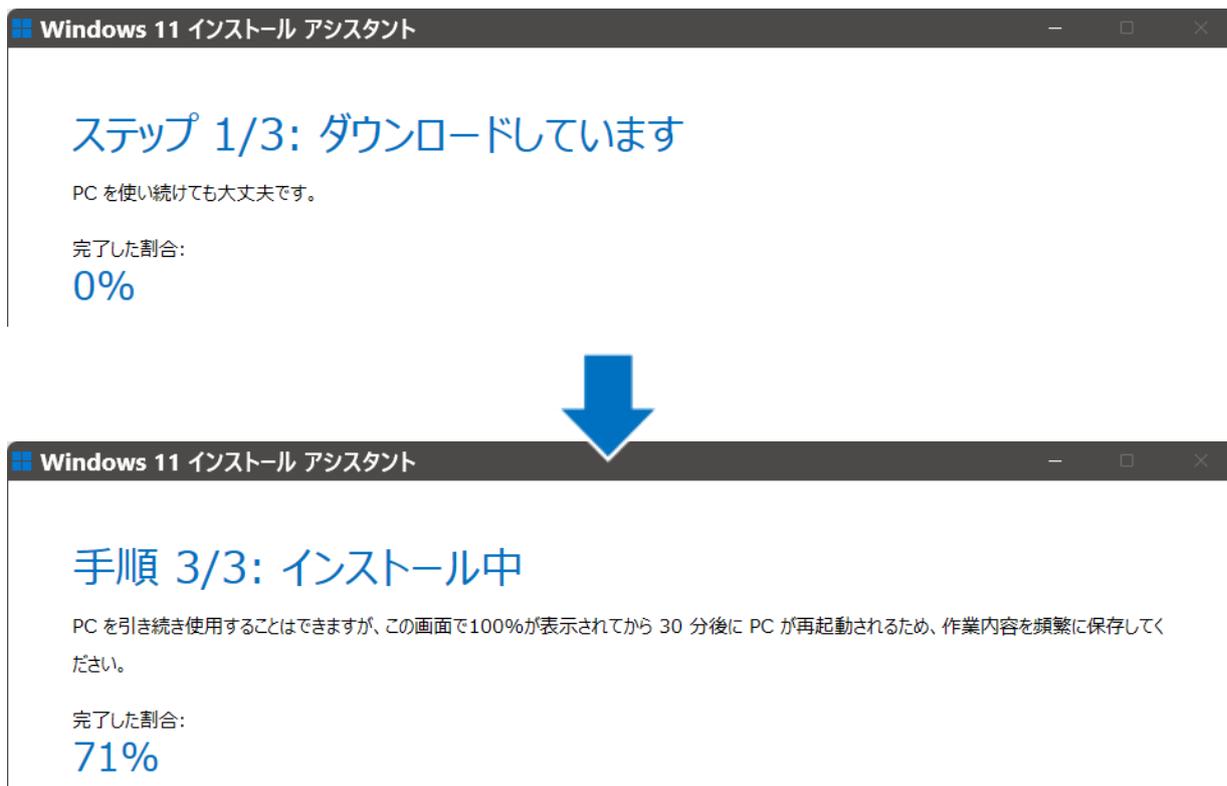

「・・・再起動する必要があります。」の表示がされたら「**後で再起動する**」ボタンをクリックして画面を閉じます。

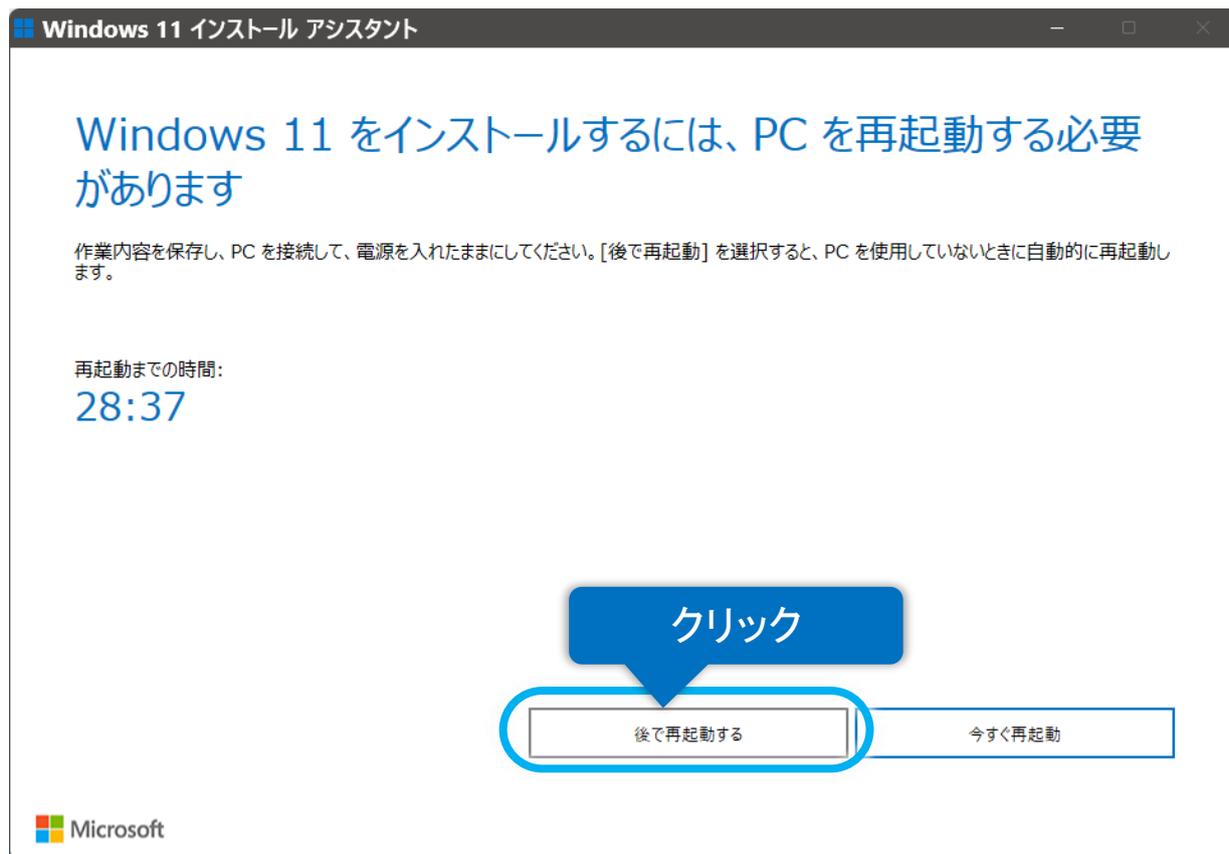

- 開いているファイルや起動しているプログラムがないことを確認して、デスクトップ画面中央下の[スタート]→[電源]→[再起動]を順にクリックすると、システム装置が再起動します(再起動は複数回行われることがあります)。

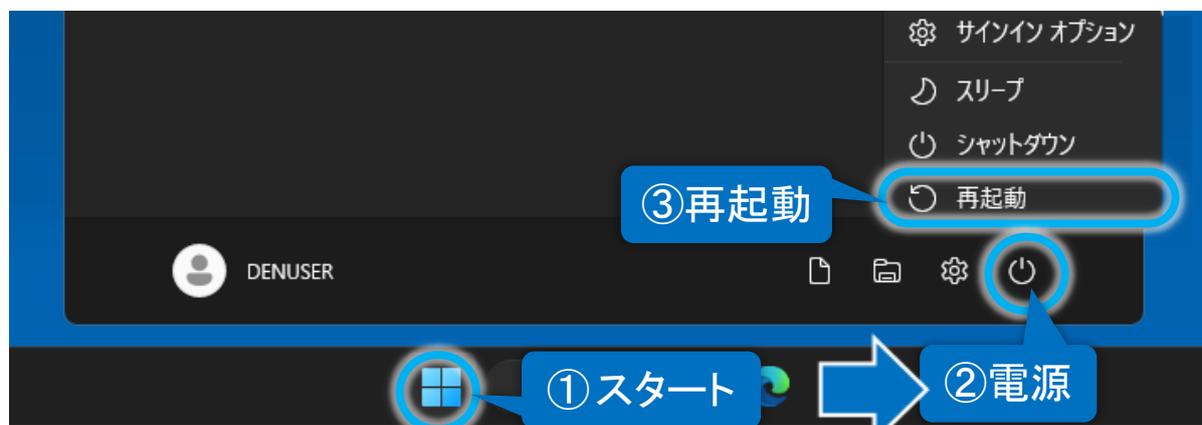

9. 再起動後、下記リンクを参照して OS のバージョンを確認します。
※2. 項で確認したバージョンになっていることを確認します。

日立ケーイーシステムズ【伝の心】トラブルシューティングマニュアル：
[OS バージョンの確認手順](#)


10. 最後に、Windows Update の設定を行います。

(1) デスクトップ画面の下タスクバーのexplorerアイコン  をクリックします。




(2) 表示された画面の左ペインの「PC」をクリックします。

(3) 更に[ローカルディスク(C:)]→[DENTOOL]→[winupdate]の順にダブルクリックしていきます。

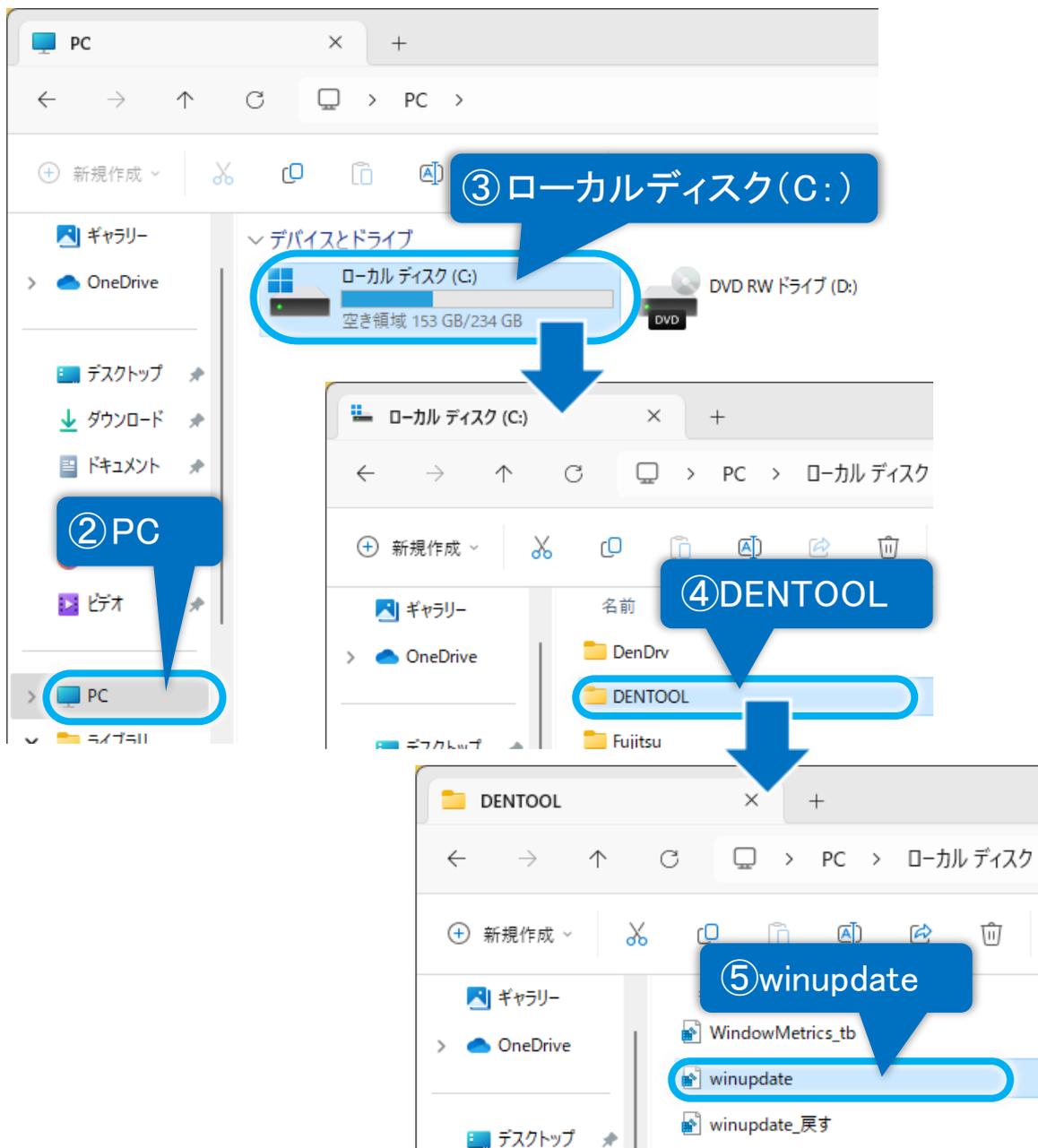

(4) [winupdate]をダブルクリックすると、下記確認画面が表示されるので、**はい**ボタンをクリックしてください。

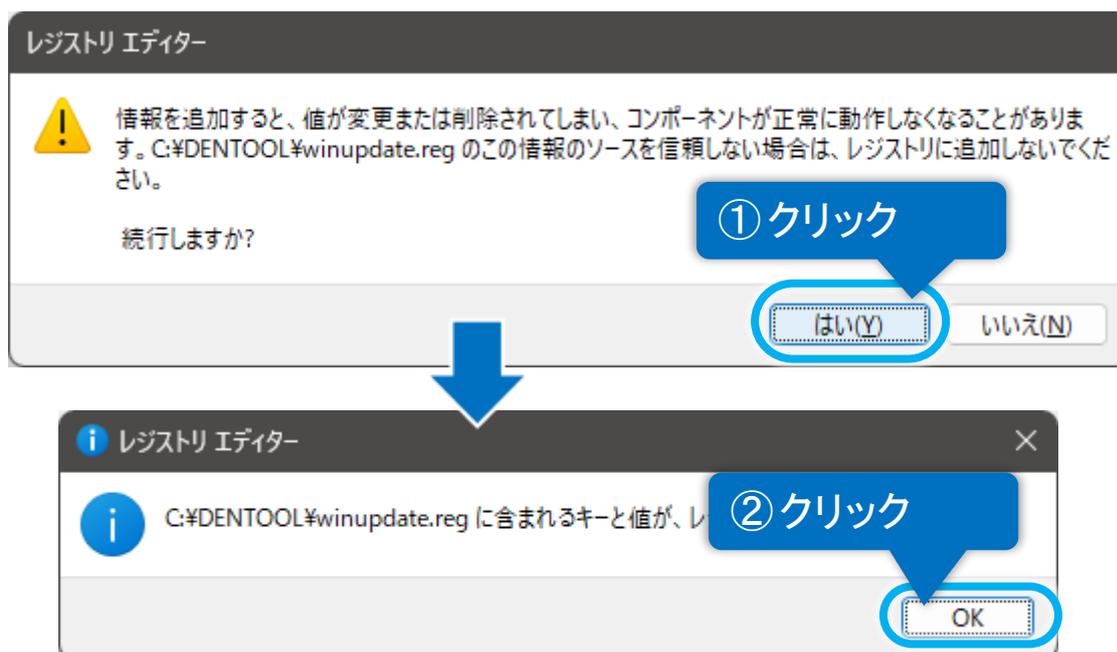

(5) 「レジストリに正常に追加されました」のメッセージが表示されますので、**OK**ボタンをクリックしてください。

※ Microsoft セキュリティ情報について

Windows における脆弱性については Microsoft セキュリティ情報を参照ください。

Microsoft セキュリティ情報

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/security-updates/>