

伝の心販売会社 御中

発行:2016年10月26日 (株)日立ケーイーシステムズ

「伝の心通信」(第10号)

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 「伝の心通信」(第10号)を発行させて頂きます。

トピックス① Windows10のUSB機器の取り外し方

Windows 10でも、Windows 7とほぼ同じ操作で、USB機器を取り外せます。


(1)タスクトレイのUSBアイコンを 🗓 マウスで左クリックします。




(2)ポップアップが表示されるので、取り外したいUSB機器を選択して左クリックします。




(3)Windows10では、取り外しができる状態になっても下記のような表示はでませんが、USB機器が取り外し可能です。

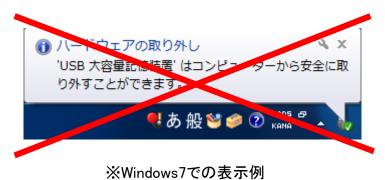


- (1)コンセントから電源は供給されていますか? (抜けたりしていませんか? スイッチ付きのタップの場合、スイッチは入っていますか?)
- (2)ケーブルおよびジャック部分が確実に接続されているか確認してください。

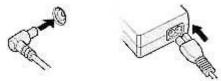

(3) バッテリパックを一度外し、再装着を行い、再度電源を投入してください。

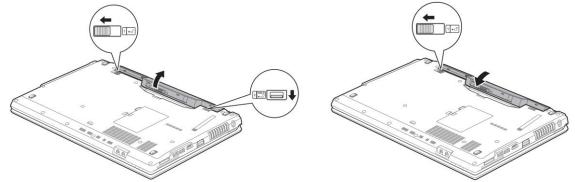

- ※機種によって、バッテリパックの位置が異なります。詳細は、お使いの機種の「ハードウェアマニュアル」等をご参照ください。
- (4)AC電源アイコン、またはAC電源ランプが点灯しているか確認してください。

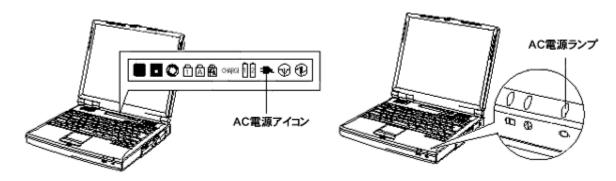

※機種によって、電源ランプまたは電源アイコンの位置が異なります。詳細は、お使いの機種の「ハードウェアマニュアル」等をご参照ください。

項目(1)~(4)にあてはまらない場合は、メインボードまたはCPUボード、ACアダプタが故障している可能性がありますので、修理依頼をご検討ください。

※トラブルシュートは、弊社Webに掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.hke.jp/products/dennosin/denmanual.htm

次回のトピックス予告

☆次回のトピックスは・・・「Windows10についての情報(4回目)」他を予定しております。 今後も「伝の心通信」を通じて、少しでも皆様のお役に立つ情報をお伝えして参ります。

また、皆様より、ご意見、取り上げて欲しいトピックス等も募集しておりますので、下記までお送りください。 e-mail:dennoshin@hke.jp ・・・「伝の心通信 係」

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。