

伝の心販売会社 御中

発行：2021年6月23日
(株)日立ケーイーシステムズ

「伝の心通信」(第68号)

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

「伝の心通信」(第68号)を発行させていただきます。

トピックス1

伝の心Ver. 06-30についてのご紹介(1)移行ツール

6月10日より、伝の心の新しいバージョン、Ver.06-30の発売を開始しました。
今回から数回に分けて、この新しいバージョンについて、お知らせ致します。

初回の今月は「伝の心」移行ツール(for Ver.06-30)(以下移行ツール)について、補足事項をお知らせいたします。

「移行ツール」は、一次販売会社様に配布済みの「伝の心」Ver.06-30サポートディスク(以下サポートディスク)もしくは、伝の心本体「C:\¥DENTOOL」フォルダ内に格納されております。

■補足事項1:Windows7の「伝の心」からの移行

サポートは終了しておりますので移行ツールは起動しませんが、下記「1. Windows7の「伝の心」での移行ツールの起動方法」に記載の手順で起動させることが可能です。

■補足事項2:お気に入りの移行

「IEからEdgeへのお気に入り移行手順書.pdf」については、Edgeのバージョンアップに伴い一部手順が変更になります。

詳細は「2. IEから「お気に入り」データの取得について」に記載します。

また新しい「IEからEdgeへのお気に入り移行手順書.pdf」を添付いたしますので、差し替えてご覧ください。


※「IEからEdgeへのお気に入り移行手順書.pdf」は、サポートディスクにのみ格納されています。

1. Windows7の「伝の心」での移行ツールの起動方法

注意事項


Windows7の「伝の心」からの移行に関しましては、サポートが終了しておりますので、保証の限りではありません。
ご使用者の責任の範囲にて、ご利用ください。

サポートディスクに格納されている「伝の心」Ver.06-30 への移行ツール 操作手順書.pdfに従って、移行元の「伝の心」から移行ツールを起動する際、移行元の「伝の心」が Windows7 の「伝の心」(~Ver.05-73)の場合、下記のようなエラーメッセージが表示されます。

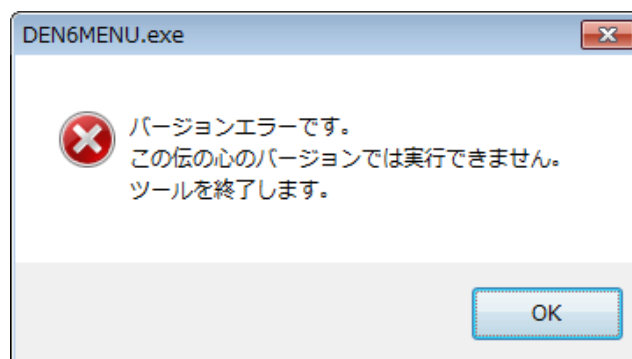


移行元の「伝の心」が Ver.05-30～05-73 の場合は、下記の手順で移行ツールを起動してください。

- ① 移行用 USB メモリーの「DENCHG06」フォルダにて、アドレスバーの右端の空白部分をクリックします。

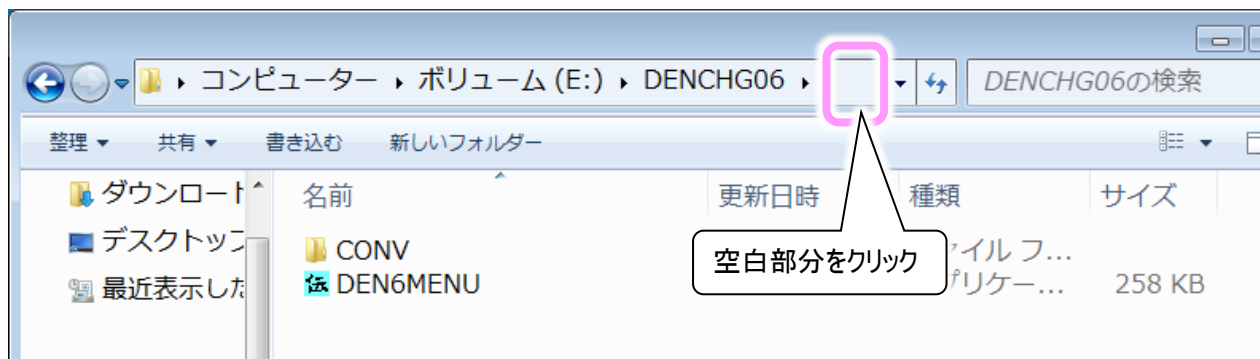


- ② アドレスバーの表示が下記のように反転表示になるので、もう一度右端の空白部分をクリックします。

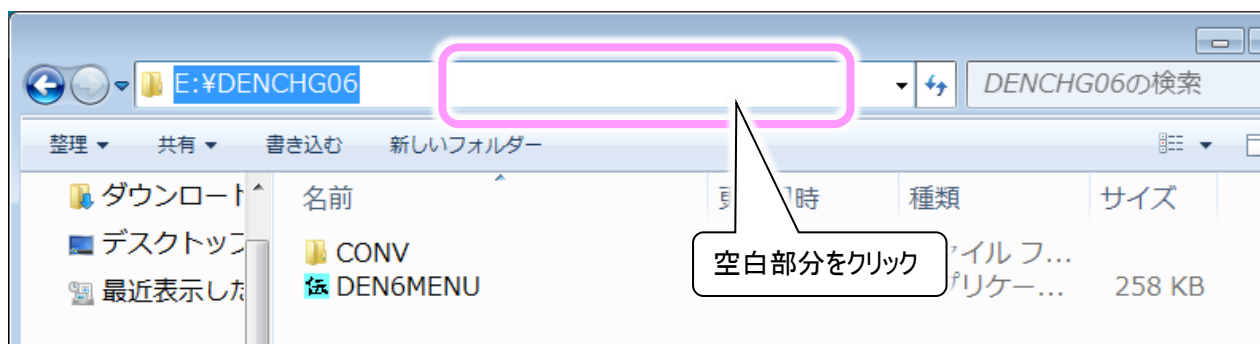

- ③ 反転表示が解除され、入力カーソルが「DENCHG06」の右端に表示されるので、キーボードから「¥DEN6MENU V05」と半角で入力します。

※¥DEN6MENU と V05 の間はスペースが1文字入ります。また V05 の「0」は数字のゼロです。

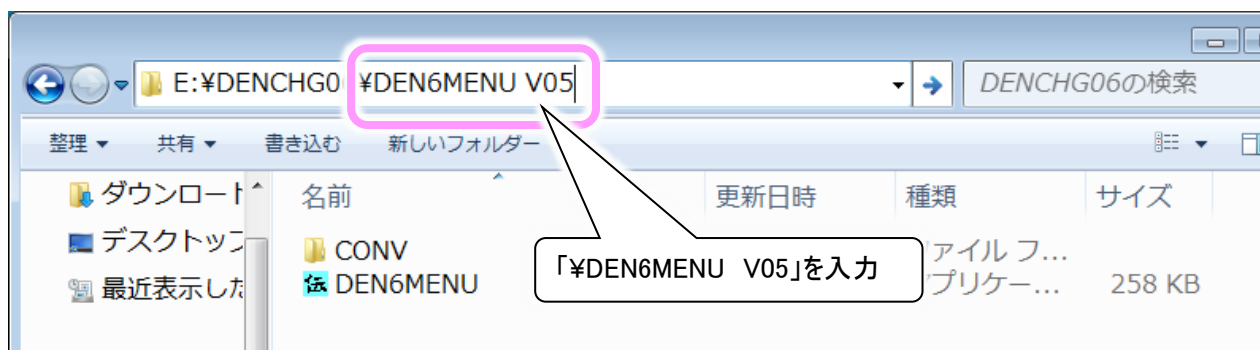


- ④ 続いてキーボードから「Enter」キーを入力すると、移行ツールが起動します。起動後は、サポート対象のバージョンと同様に操作可能です。



2. IEから「お気に入り」データの取得について

新しい「IE から Edge へのお気に入り移行手順書.pdf」での変更箇所は 7 ページの(11)項です。変更点は、「お気に入り」データ保存時のファイル名となります。ファイル名は「bookmark.html」と入力して保存してください。

【変更後】

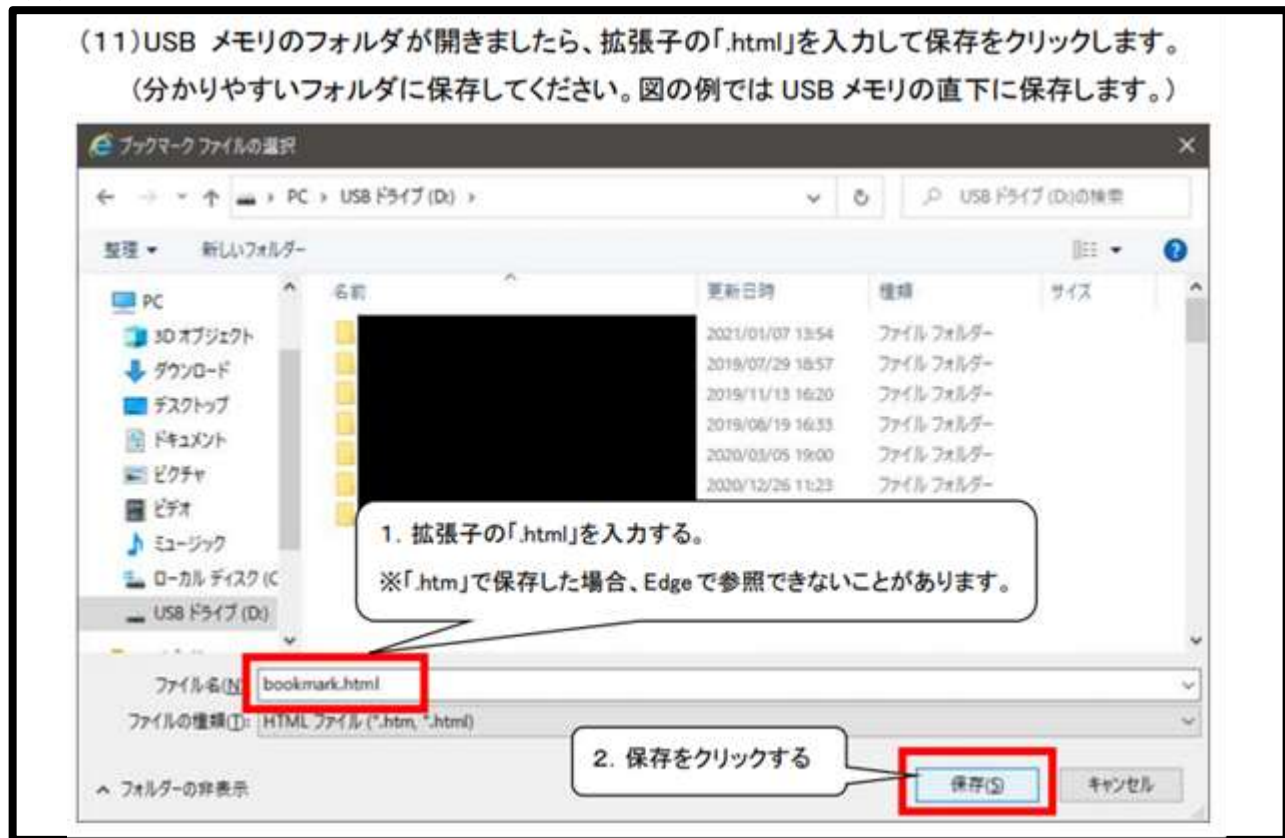

— 以上 —

次回のトピックス予告

今回は、Ver.06-30の新機能についてご紹介したいと思います。
これからも皆様のお役に立つ各種情報をお伝えして参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。
また、皆様より、ご意見、取り上げて欲しいトピックス等も募集しておりますので、下記までお送りください。
e-mail: dennoshin@hke.jp

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。