



▼伝の心 06-10~06-20 用 LINE 機能アップデート

(1) 伝の心を停止してください。


(2) アップデートファイルの入った USB メモリを「伝の心」に接続し、[スタート]→[エクスプローラー]を選択します。

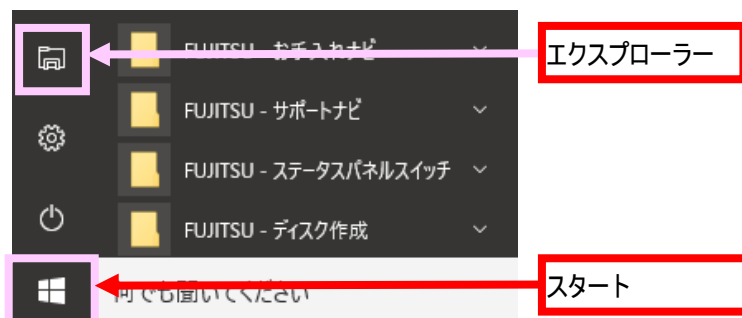


(3) 接続した「USB ドライブ」を右クリックしてメニューを開き、メニューから[開く]を選択します。

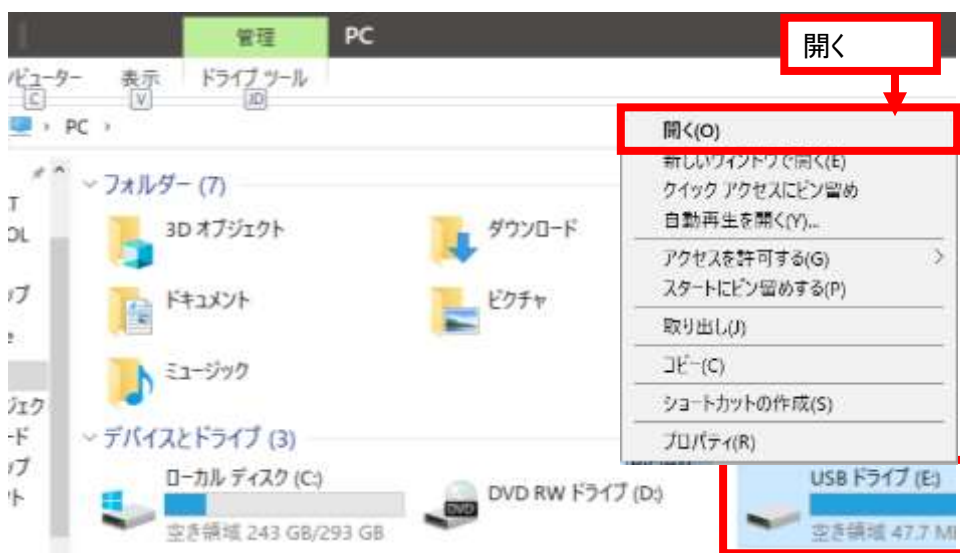


(4) 「USB ドライブ」が開くので、「LINE6.0X 対応パッチ」フォルダーを右クリックしてメニューを開き、メニューから[コピー]を選択します。

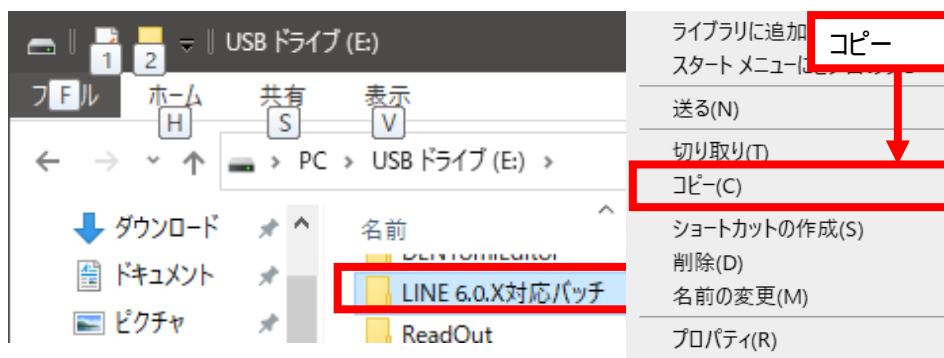


- (5) デスクトップ画面を右クリックしてメニューを開き、メニューから[貼り付け]を選択します。

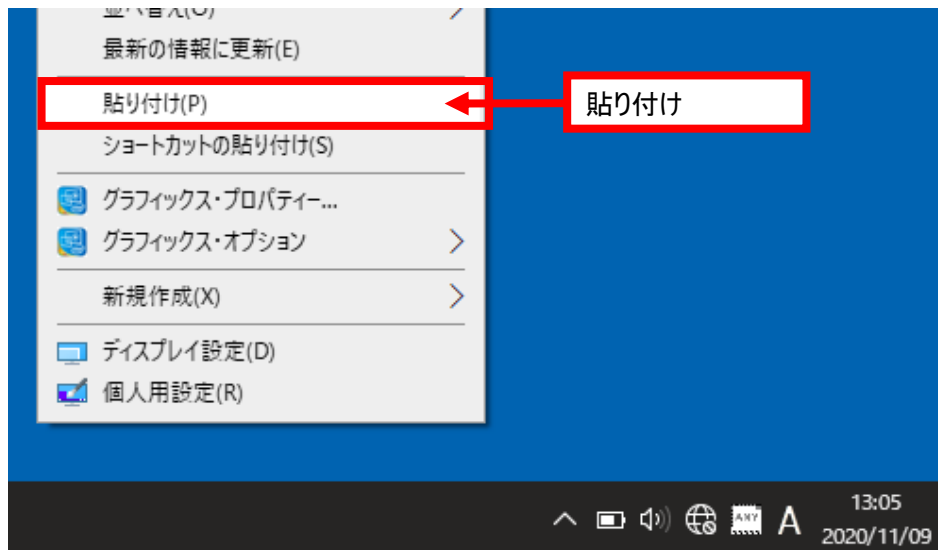

- (6) デスクトップに「LINE6.0X 対応パッチ」フォルダーがコピーされたら、「LINE6.0X 対応パッチ」フォルダーを右クリックしてメニューを開き、メニューから[開く]を選択します。

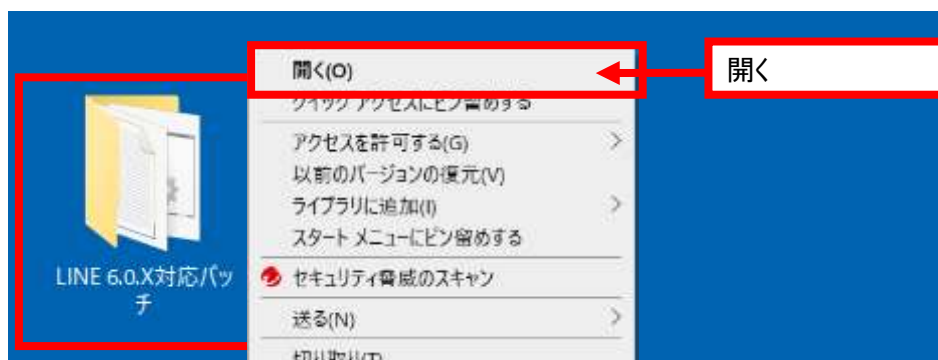

- (7) 「LINE6.0X 対応パッチ」フォルダーが開くので、「update.bat」を右クリックしてメニューを開き、メニューから[管理者として実行]を選択します。

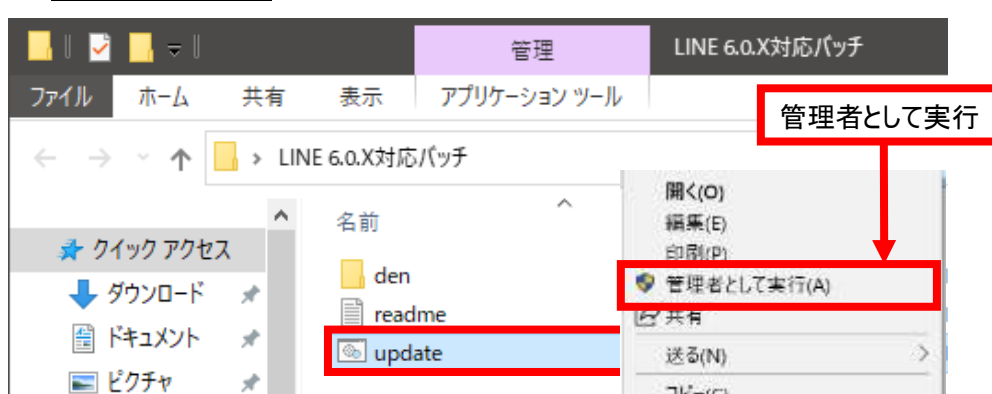

- (8) 下記画面が表示されるので、「Enter」キーを押下します。

```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
本バッチ実行前に下記(1)~(3)をご確認ください。
(1)バージョンアップバッチ(update.bat)以外のフォルダをすべて閉じてください。
(2)「伝の心」が起動していた場合は、readme.txtを参考に「伝の心」を停止してください。
(3)管理者として実行していない場合は、ウィンドウを閉じた後、管理者として実行し直してください。
管理者として実行する方法は、readme.txtを参照してください。

伝の心の設定ファイルを、バージョン6.0.X以降のLINEのレイアウトに対応するために変更します。
続行するには何かキーを押してください . . .
```

- (9) 下記画面が表示されるので、「設定を変更しました。」の表示があるのを確認して、「Enter」キーを押下します。

```
設定を変更しました。
続行するには何かキーを押してください . . .
```

- (10) 伝の心を起動して、「LINE」を選択し、LINE のトーク画面表示を確認してください。



■トーク画面の設定が変更されている場合(その1)

下記画面のように、友だちの一覧表示が広がっている場合は、右上の☰ボタンをクリックしてください。右側にトーク画面が表示されます。



■トーク画面の設定が変更されている場合(その2)

下記のようにトーク画面が別のウィンドウで表示されている場合は、トークを読み込むボタンをクリックしてください。右側にトーク画面が表示されます。



以上